



HM GENERAL MEDICAL BROCHURE

Table des matières

2 Table des matières

6 ACCESSOIRES

6 TDC VITRECTOMES

6 23G

6 25G

7 27G

7 ÉCLAIRAGE INTRAOCULAIRE

7 20G

8 23G

9 25G

9 27G

10 PHAKO

10 MINI-PIÈCE À MAIN DE PHACOÉMULSIFICATION

11 AIGUILLE DE PHACOÉMULSIFICATION

14 SONDES LASER

14 20G

14 23G

15 25G

16 27G

16 PACK POUR VITRECTOMIE

18 IRRIGATION/ASPIRATION

19 INJECTION/EXTRACTION

20 ÉCHANGE AIR-FLUIDES

20 DIATHERMIE

21 LASER ACCESSOIRES

22 AUTRES ACCESSOIRES

22 INSTRUMENTS

22 USAGE UNIQUE 23G

22 SYSTÈME TRANSCONJONCTIVAL

23 ONE STEP

23 TWO STEP

23 VITRECTOMES

24 STANDARD

24 TDC

25	MICROFORCEPS/MICROCISEAUX
26	INSTRUMENTS À DÉBIT RÉTROGRADE
27	ÉCLAIRAGE INTRAOCULAIRE
28	SONDES LASER
28	SONDES LASER INCRÉMENTIELLES COURBES
29	SONDES LASER DIRECTIONNELLES
29	SONDES LASER STANDARD, DROITES
30	SONDES LASER INCRÉMENTIELLES LUMINEUSES
30	CONSOMMABLES DIVERS
32	RÉUTILISABLES 23G
32	SYSTÈME TRANSCONJONCTIVAL
33	MICROFORCEPS/MICROCISEAUX
35	INSTRUMENTS À DÉBIT RÉTROGRADE
36	INSTRUMENTS À MEMBRANE
36	DIATHERMIE
36	USAGE UNIQUE 25G
37	SYSTÈME TRANSCONJONCTIVAL
37	VITRECTOMES
37	STANDARD
38	TDC
38	MICROFORCEPS/MICROCISEAUX
40	INSTRUMENTS À DÉBIT RÉTROGRADE
41	ÉCLAIRAGE INTRAOCULAIRE
41	SONDES LASER
41	SONDES LASER STANDARD, DROITES
42	SONDES LASER DIRECTIONNELLES
42	SONDES LASER INCRÉMENTIELLES COURBES
43	SONDES LASER INCRÉMENTIELLES LUMINEUSES
43	INSTRUMENTS À MEMBRANE
44	CONSOMMABLES DIVERS
44	RÉUTILISABLES 25G
44	MICROFORCEPS/MICROCISEAUX
46	DIATHERMIE
46	USAGE UNIQUE 27G
46	SYSTÈME TRANSCONJONCTIVAL
46	VITRECTOMES
46	STANDARD

47	TDC
48	MICROFORCEPS/MICROCISEAUX
49	INSTRUMENTS À DÉBIT RÉTROGRADE
49	ÉCLAIRAGE INTRAOCULAIRE
50	SONDES LASER
50	SONDES LASER INCRÉMENTIELLES COURBES
51	CONSOMMABLES DIVERS
51	RÉUTILISABLES 27G
51	MICROFORCEPS/MICROCISEAUX
51	INSTRUMENTS À MEMBRANE
52	DIATHERMIE
52	LIQUIDES POUR CHIRURGIE OPHTALMIQUE/TAMPONNADE
52	COLORANT POSTÉRIEUR
52	MEMBRANEBLUE-DUAL
52	ILM-BLUE
52	TAMPONNADE
53	HUILE DE SILICONE
53	PFCL
54	OCUGAS
54	ACCESSOIRES
55	APPAREILS CHIRURGICAUX
56	LEDSTAR
56	ULTRA SPEED TRANSFORMER
57	ASSOCIATE
57	CRYOSTAR ACCESSOIRES
57	ADAPTATEURS
58	LENTILLE POUR VITRECTOMIE À USAGE UNIQUE
58	KÉRATOPROTHÈSE TEMPORAIRE ECKARDT
59	PRODUITS POUR CERCLAGE SCLÉRAL
60	INSTRUMENTS
60	USAGE UNIQUE
61	AIGUILLE DE PHACOÉMULSIFICATION
63	COUTEAUX À CATARACTE
63	COUTEAUX À FENTE À BISEAU SUPÉRIEUR - ANGULAIRES
63	COUTEAUX À FENTE À DOUBLE BISEAU - ANGULAIRES

- 64 COUTEAUX DE TYPE POIGNARD
- 64 COUTEAU EN CROISSANT
- 64 COUTEAUX CORNÉENS TRANSPARENTS
- 64 LAMES MVR

65 CANULES

- 65 CANULES RÉTROBULBAIRES POUR ANESTHÉSIE
- 65 CANULE SOUS-TÉNONIENNE POUR ANESTHÉSIE
- 65 CANULES POUR CHAMBRE ANTÉRIEURE
- 66 PRÉSERVATEUR DE CHAMBRE ANTÉRIEURE
- 66 CANULES POUR HYDRODISSECTION
- 66 CANULE POUR IRRIGATION / ASPIRATION

67 ACCESSOIRES

67 RÉUTILISABLES

67 INSTRUMENTS POUR CAPSULORHEXIS

67 PHACO

- 67 ACCESSOIRES D'IRRIGATION/ASPIRATION
- 68 MINI-PIÈCE À MAIN DE PHACOÉMULSIFICATION
- 69 AIGUILLE DE PHACOÉMULSIFICATION: 1.8 MM
- 69 AIGUILLE DE PHACOÉMULSIFICATION: 2.2 MM
- 70 AIGUILLE DE PHACOÉMULSIFICATION: 2.4 MM
- 71 AIGUILLE DE PHACOÉMULSIFICATION: 2.5 MM
- 71 AIGUILLE DE PHACOÉMULSIFICATION: 2.8 MM
- 72 MINI-PIÈCE À MAIN DE PHACOÉMULSIFICATION
- 72 ACCESSOIRES

73 INSTRUMENTS CORNÉENS

73 DSEK/DSAEK/DMEK

74 LIQUIDES POUR CHIRURGIE OPHTALMIQUE

74 VISIONBLUE

ACCESSOIRES

TDC VITRECTOMES

23G

8268.VIT23 **Vitréotome à usage unique à haute vitesse TDC 23G / 8000**
CPM, gamme DORC Continuum

Code couleur: ● Box/6 | Stérile: Oui



Indications :

- Elimination rapide et sûre du vitré

Caractéristiques et avantages :

- PLUS SÛR : La double vitesse de coupe diminue la traction sur les tissus environnants.
- PLUS RAPIDE : Le cycle de fonctionnement de 92% génère un débit d'aspiration constant indépendant de la vitesse de coupe.
- Débit d'aspiration ACCRU, jusqu'à trois fois supérieur au débit usuel.
- MEILLEUR : Réduction des turbulences liées aux variations de flux au niveau du port d'aspiration grâce à l'ouverture constante du port d'aspiration.

25G

8268.VIT25 **Vitréotome à usage unique à haute vitesse TDC 25G / 8000**
CPM, gamme DORC Continuum

Code couleur: ● Box/6 | Stérile: Oui



Indications :

- Elimination rapide et sûre du vitré

Caractéristiques et avantages :

- PLUS SÛR : La double vitesse de coupe diminue la traction sur les tissus environnants.
- PLUS RAPIDE : Le cycle de fonctionnement de 92% génère un débit d'aspiration constant indépendant de la vitesse de coupe.
- Débit d'aspiration ACCRU, jusqu'à trois fois supérieur au débit usuel.
- MEILLEUR : Réduction des turbulences liées aux variations de flux au niveau du port d'aspiration grâce à l'ouverture constante du port d'aspiration.

27G

8268.VIT27 **Vitréotome à usage unique à haute vitesse TDC 27G / 8000 CPM, gamme DORC Continuum**

Code couleur: ● Box/6 | Stérile: Oui



Indications :

- Elimination rapide et sûre du vitré

Caractéristiques et avantages :

- PLUS SÛR : La double vitesse de coupe diminue la traction sur les tissus environnants.
- PLUS RAPIDE : Le cycle de fonctionnement de 92% génère un débit d'aspiration constant indépendant de la vitesse de coupe.
- Débit d'aspiration ACCRU, jusqu'à trois fois supérieur au débit usuel.
- MEILLEUR : Réduction des turbulences liées aux variations de flux au niveau du port d'aspiration grâce à l'ouverture constante du port d'aspiration.

8310.27KS **27G Ultra Set de vitrectomie Ultra-court**

Code couleur: ● Box/1 kit | Stérile: Oui



Optimisé pour les petits yeux. 3 instruments inclus:

- Trocart 1 temps ultra-court 27G (inserteur et trocart 25% plus courts. Le trocart est conçu pour une meilleure retention;
- Fibre endo-illumination grand champ shielded ultra-courte 27G (20% plus courte);
- Vitréotome ultra-court TDC 27G (20% plus court, rigidité augmentée de 60%).

* En comparaison aux instruments 27G standards.

ÉCLAIRAGE INTRAOCULAIRE

20G

3269.B **Sonde pour endo-illumination TotalView, 20G / 0,9 mm, avec dépresseur scléral lumineux**

Code couleur: ● Box/6 | Stérile: Oui



Sonde à fibre optique avec fibre de forme conique pour un champ d'illumination plus large.

3269.D **Sonde pour endo-illumination, 20G / 0,9 mm, avec dépresseur scléral lumineux**

Code couleur: ● Box/6 | Stérile: Oui



Sonde à fibre optique pour éclairage droit.

3269.SBS **Sonde pour endo-illumination TotalView semi masquée, 20G / 0,9 mm**

Box/6 | Stérile: Oui



3269.D06 Sonde pour endo-illumination, 23G / 0,6 mm, avec dépresseur scléral lumineux

Code couleur: ● Box/6 | Stérile: Oui



Accessoires stériles pour phacoémulsification

3269.EB06 Eclairage Totalview pour système de vitrectomie 23G / 0,6 mm

Code couleur: ● Box/6 | Stérile: Oui



- Fibre optique TotalView avec fixation pour canule polyimide.
- Longueur de l'extrémité de la fibre optique réglable.

3269.SB06 Sonde pour endo-illumination TotalView Spaide, 23G / 0,6 mm

Code couleur: ● Box/6 | Stérile: Oui



Embout de conception exclusive associant éclairage direct et éclairage diffus à large champ.

3269.SBS06 Sonde pour endo-illumination anti-reflet TotalView, 23G / 0,6 mm, avec dépresseur scléral lumineux

Code couleur: ● Box/6 | Stérile: Oui



3269.B06 Sonde pour endo-illumination TotalView, 23G / 0,6 mm, avec dépresseur scléral lumineux

Code couleur: ● Box/6 | Stérile: Oui



Sonde à fibre optique avec fibre de forme conique pour un champ d'illumination plus large.

3269.MF06 Combiné multifibre sonde d'endo-illumination / Chandelier Eckardt 23G

Code couleur: ● Box/6 | Stérile: Oui



- Instrument multifonctions
- Un même instrument standard pour l'endo-illumination ou l'illumination par chandelier
- Chirurgie bimanuelle
- Illumination de type TotalView

25G

3269.B05 Sonde pour endo-illumination TotalView, 25G / 0,5 mm, avec
dépresseur scléral lumineux

Code couleur: ● Box/6 | Stérile: Oui



Sonde à fibre optique avec fibre de forme conique pour un champ d'illumination plus large.

3269.D05 Sonde pour endo-illumination, 25G / 0,5 mm, avec dépresseur
scléral lumineux

Code couleur: ● Box/6 | Stérile: Oui



3269.EB05 Chandelier grand champ pour système de trocars 25G / 0,5
mm.

Code couleur: ● Box/6 | Stérile: Oui



- Fibre optique TotalView avec fixation pour canule polyimide.
- Longueur de l'extrémité de la fibre optique réglable.

3269.SBS05 Sonde pour endo-illumination anti-reflet TotalView, 25G / 0,5
mm, avec dépresseur scléral lumineux

Code couleur: ● Box/6 | Stérile: Oui



27G

3269.MBD27 Chandelier Twinlight d' Eckardt 27G / 0,4 mm

Code couleur: ● Box/6 | Stérile: Oui



3269.PD27 Chandelier Twinlight d' Eckardt 27G avec connecteur Photon®
et aiguille de guidage

Box/6 | Stérile: Oui



3269.P27 Eclairage à fibre optique 27G (une fibre optique) avec
connecteur Photon® et aiguille de guidage

Box/6 | Stérile: Oui



3269.BE27 Eclairage à fibre optique 27G et pièce à main pour fibre optique
standard type d (gaine 23G) avec aiguille de guidage 27G

Code couleur: ● Box/6 | Stérile: Oui



3269.A27 Eclairage à fibre optique 27G (une fibre) avec aiguille de guidage

Code couleur: ● Box/6 | Stérile: Oui



3269.D04 Sonde pour endo-illumination, 27G / 0,4 mm, avec dépresseur scléral lumineux

Code couleur: ● Box of 6 | Stérile: Oui



Sonde pour endo-illumination, 27G / 0,4 mm

3269.B04 Sonde pour endo-illumination TotalView, 27G / 0,4 mm, avec dépresseur scléral lumineux


Code couleur: ● Box/6 | Stérile: Oui



Sonde à fibre optique avec fibre de forme conique pour un champ d'illumination plus large.

3269.SBS04 Sonde d'endo-illumination grand champ anti reflet avec dépresseur scléral lumineux (27G/0,4 mm)

Code couleur: ● Box of 6 | Stérile: Oui

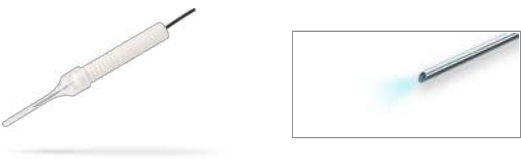

PHAKO

MINI-PIECE A MAIN DE PHACOEMULSIFICATION

3002.P Pièce à main de phacoémulsification Sure Touch

Box/1 | Stérile: Non



- Forme compacte plus facile à tenir en main pour les chirurgiens qui préfèrent une pièce à main de plus petite taille.
- Pièce à main plus légère – plus confortable à tenir en main au cours de l'intervention.
- Poignée ergonomique rainurée pour des gestes sûrs durant l'intervention.
- Compatible avec la gamme actuelle d'accessoires pour phacoémulsification DORC.

3002 Pièce à main de phacoémulsification

Box/1 | Stérile: Non



3002.M Pièce à main de microphacoémulsification/fragmentation ultra-légère

Box/1 | Stérile: Non



AIGUILLE DE PHACOEMULSIFICATION

8400.18F01 Aiguille de phacoémulsification évasée trois crans pour incision
MICS de 1,8 mm (à usage unique)

Box of 6 | Stérile: Oui



Chaque kit comprend :

- 1 aiguille évasée trois crans pour incision de 1,8 mm
- 2 manchons d'irrigation pour aiguille de phacoémulsification 1,8 mm, modèle 3008.IR18
- 1 chambre de test pour pièce à main de phacoémulsification, modèle 3007
- 1 clef de serrage

8400.18A01 Aiguille de phacoémulsification évasée angulée trois crans pour
incision MICS de 1,8 mm (à usage unique).

Box of 6 | Stérile: Oui



Chaque kit comprend :

- 1 aiguille évasée angulée trois crans pour incision de 1,8 mm
- 2 manchons d'irrigation pour aiguille de phacoémulsification 1,8 mm, modèle 3008.IR18
- 1 chambre de test pour pièce à main de phacoémulsification, modèle 3007
- 1 clef de serrage

8400.22F01 Aiguille de phacoémulsification évasée trois crans pour incision
de 2,2 mm (à usage unique)

Box of 6 | Stérile: Oui



Chaque kit comprend :

- 1 aiguille évasée trois crans pour incision de 2,2 mm
- 2 manchons d'irrigation pour aiguille de phacoémulsification 2,2 mm, modèle 3008.IR22
- 1 chambre de test pour pièce à main de phacoémulsification, modèle 3007
- 1 clef de serrage

8400.22A01 Aiguille de phacoémulsification évasée angulée trois crans pour
incision de 2,2 mm (à usage unique)

Box of 6 | Stérile: Oui



Chaque kit comprend :

- 1 aiguille évasée angulée trois crans pour incision de 2,2 mm
- 2 manchons d'irrigation pour aiguille de phacoémulsification 2,2 mm, modèle 3008.IR22
- 1 chambre de test pour pièce à main de phacoémulsification, modèle 3007
- 1 clef de serrage

8400.22S01 Aiguille de phacoémulsification droite pour incision de 2,2 mm
(à usage unique)

Box of 6 | Stérile: Oui



Chaque kit comprend :

- 1 aiguille droite pour incision de 2,2 mm
- 2 manchons d'irrigation pour aiguille de phacoémulsification 2,2 mm, modèle 3008.IR22
- 1 chambre de test pour pièce à main de phacoémulsification, modèle 3007
- 1 clef de serrage

8400.25F01 Aiguille de phacoémulsification évasée trois crans pour incision
de 2,5 mm (à usage unique)

Box of 6 | Stérile: Oui



Chaque kit comprend :

- 1 aiguille évasée trois crans pour incision de 2,5 mm
- 2 manchons d'irrigation pour aiguille de phacoémulsification 2,5 mm, modèle 3008.IR25
- 1 chambre de test pour pièce à main de phacoémulsification, modèle 3007
- 1 clef de serrage

8400.25A01 **Aiguille de phacoémulsification évasée angulée trois crans pour incision de 2,5 mm (à usage unique)**

Box of 6 | Stérile: Oui



Chaque kit comprend :

- 1 aiguille évasée angulée trois crans pour incision de 2,5 mm
- 2 manchons d'irrigation pour aiguille de phacoémulsification 2,5 mm, modèle 3008.IR25
- 1 chambre de test pour pièce à main de phacoémulsification, modèle 3007
- 1 clef de serrage

8400.25S01 **Aiguille de phacoémulsification droite pour incision de 2,5 mm (à usage unique)**

Box of 6 | Stérile: Oui



Chaque kit comprend :

- 1 aiguille droite pour incision de 2,5 mm
- 2 manchons d'irrigation pour aiguille de phacoémulsification 2,5 mm, modèle 3008.IR25
- 1 chambre de test pour pièce à main de phacoémulsification, modèle 3007
- 1 clef de serrage

8400.28F01 **Aiguille de phacoémulsification évasée trois crans pour incision de 2,8 mm (à usage unique)**

Box of 6 | Stérile: Oui



Chaque kit comprend :

- 1 aiguille évasée trois crans pour incision de 2,8 mm
- 2 manchons d'irrigation pour aiguille de phacoémulsification 2,5 mm, modèle 3008.IR28
- 1 chambre de test pour pièce à main de phacoémulsification, modèle 3007
- 1 clef de serrage

8400.28A01 **Aiguille de phacoémulsification évasée angulée trois crans pour incision de 2,8 mm (à usage unique)**

Box of 6 | Stérile: Oui



Chaque kit comprend :

- 1 aiguille évasée angulée trois crans pour incision de 2,8 mm
- 2 manchons d'irrigation pour aiguille de phacoémulsification 2,8 mm, modèle 3008.IR28
- 1 chambre de test pour pièce à main de phacoémulsification, modèle 3007
- 1 clef de serrage

8430.18SF1 **MICS 1.8 mm 1.8 mm set phaco à usage unique avec aiguille droite évasée à 30°**

Box/6 | Stérile: Oui



8445.18SF1 **MICS 1.8 mm set phaco à usage unique avec aiguille droite évasée à 45°**

Box/6 | Stérile: Oui



8430.22SF1 **2.2 mm set phaco à usage unique avec aiguille droite évasée à 30°**

Box/6 | Stérile: Oui



8445.22SF1 **2.2 mm set phaco à usage unique avec aiguille droite évasée à 45°**

Box/6 | Stérile: Oui



8430.24SF1 2.4 mm set phaco à usage unique avec aiguille droite évasée à 30°

Box/6 | Stérile: Oui



8445.24SF1 2.4 mm set phaco à usage unique avec aiguille droite évasée à 45°

Box/6 | Stérile: Oui



8430.28SF1 2.8 mm set phaco à usage unique avec aiguille droite évasée à 30°

Box/6 | Stérile: Oui



8445.28SF1 2.8 mm set phaco à usage unique avec aiguille droite évasée à 45°

Box/6 | Stérile: Oui



3430.18SF1 MICS 1.8 mm set phaco réutilisable avec aiguille droite évasée à 30°

Box/6 | Stérile: Non



3445.18SF1 MICS 1.8 mm set phaco réutilisable avec aiguille droite évasée à 45°

Box/6 | Stérile: Non



3430.22SF1 2.2 mm set phaco réutilisable avec aiguille droite évasée à 30°

Box/6 | Stérile: Non



3445.22SF1 2.2 mm set phaco réutilisable avec aiguille droite évasée à 45°

Box/6 | Stérile: Non



3430.24SF1 2.4 mm set phaco réutilisable avec aiguille droite évasée à 30°

Box/6 | Stérile: Non



3445.24SF1 2.4 mm set phaco réutilisable avec aiguille droite évasée à 45°

Box/6 | Stérile: Non



3430.28SF1 2.8 mm set phaco réutilisable avec aiguille droite évasée à 30°
Box/6 | Stérile: Non




3445.28SF1 2.8 mm set phaco réutilisable avec aiguille droite évasée à 45°
Box/6 | Stérile: Non



SONDES LASER

20G

7220.DORC Sonde laser directionnelle, avec connecteur DORC®, 20G / 0,9 mm
Code couleur: ● Box/6 | Stérile: Oui

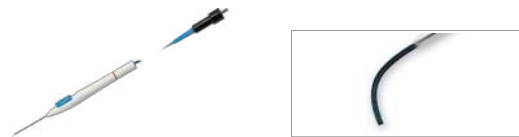


(Non disponible aux Etats-Unis)

7010.DORC Sonde laser, courbe, avec connecteur DORC®, 20G / 0,9 mm
Box/6 | Stérile: Oui




(Non disponible aux Etats-Unis)

7410.DORC Sonde laser endoilluminée, courbe, avec connecteur laser et éclairage DORC®, 20G / 0,9 mm
Box/6 | Stérile: Oui

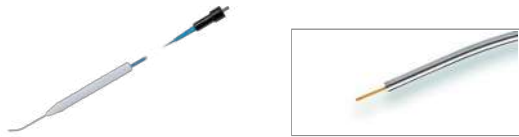


23G

7510.DORC Sonde laser endoilluminée incrémentielle, courbe à pointe conique, pour utilisation avec le système pour vitrectomie 23G / 0,6 mm
Code couleur: ● Box/6 | Stérile: Oui

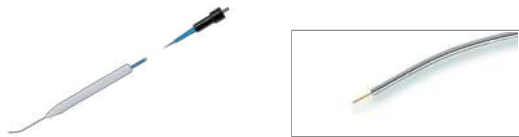

7123.DORC Sonde laser, droite, avec connecteur DORC®, 23G / 0,6 mm
Box/6 | Stérile: Oui

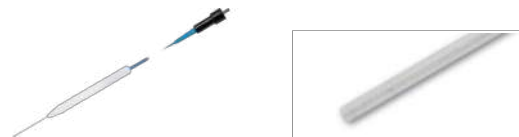


(Non disponible aux Etats-Unis)

7223.DORC Sonde laser directionnelle, avec connecteur DORC®, 23G /
0,6 mm

Code couleur: ●


Box/6 | Stérile: Oui

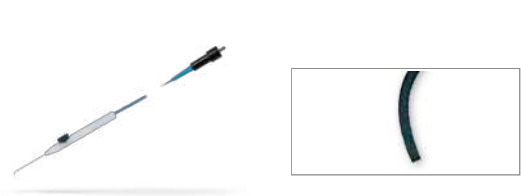

(Non disponible aux Etats-Unis)

7511.DORC Sonde laser éfilée, 23G / 0,6 mm avec connecteur DORC®

Box/6 | Stérile: Oui

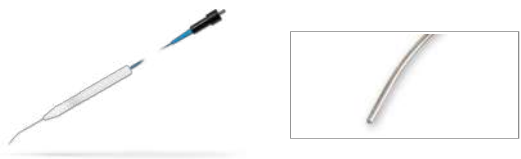

- Embout courbe flexible pour accéder à la périphérie de la rétine.
- Embout conique pour 23G à 27G.
- Technologie plus économique.
- Convient pour la plupart des systèmes de trocars 23G.

25G

7025.DORC Sonde laser, droite, avec connecteur DORC®, 25G / 0,5 mm

Box/6 | Stérile: Oui




(Non disponible aux Etats-Unis)

7225.DORC Sonde laser directionnelle, avec connecteur DORC®, 25G /
0,5 mm

Code couleur: ●

Box/6 | Stérile: Oui

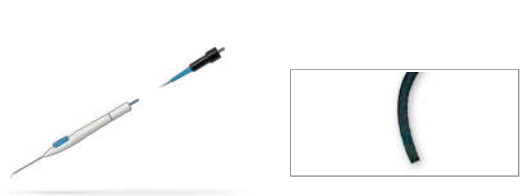


(Non disponible aux Etats-Unis)

7525.DORC Sonde laser 25G / 0,5 mm courbe éfilée avec connecteur
DORC

Code couleur: ●

Box/6 | Stérile: Oui

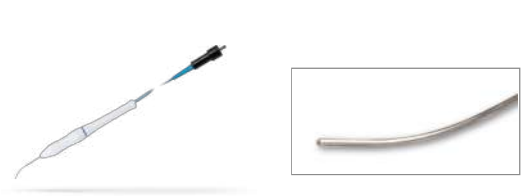

Indications :

- Embout courbe flexible pour accéder à la portion périphérique de la rétine.
- Convient pour la plupart des systèmes de canules 25G.

Caractéristiques et avantages :

- Embout conique de 0,5 mm à 0,35 mm


Arguments de vente exclusifs :

- Technologie de sonde économique.

7527.DORC

Sonde laser incrémentielle courbe, 27G/0,4 mm, avec connecteur DORC®

Box/6 | Stérile: Oui

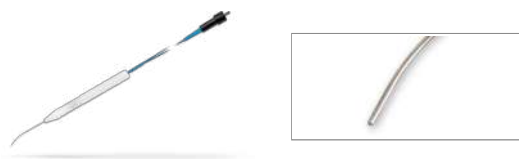

PACK POUR VITRECTOMIE

8100.CAR01

Cassette EVA avec poche de recueil de 0,5 l

Box of 6 | Stérile: Oui



Chaque kit comprend :

- Cassette EVA
- 8110.BAG01 : Poche de recueil de 0,5 l à usage unique EVA
- 8110.IAD01 : Tubulure d'irrigation/aspiration à usage unique EVA (tubulure d'irrigation non comprise dans le pack VR)
- 8110.INP01 : Perfuseur pour gravité à usage unique EVA (Perfuseur pour gravité non compris dans le pack VGPC)

8110.ACCS

Kit d'accessoires à usage unique EVA

Box of 6 | Stérile: Oui



Chaque kit comprend :

- Connecteur Luer mâle/mâle
- Connecteur Luer femelle/femelle

8110.BAG01

Poche de recueil de 0,5 l à usage unique EVA

Box of 6 | Stérile: Non



8110.DRA01

Champs à usage unique EVA

Box of 6 | Stérile: Oui



Chaque kit comprend :Champ pour télécommandeHousse pour support MayoChamp pour écran EVA

8110.IAD01

Tubulure d'irrigation/aspiration à usage unique EVA

Box of 6 | Stérile: Oui



8110.INP01

Perfuseur pour gravité à usage unique EVA

Box of 6 | Stérile: Oui



8110.VGP01

Perfuseur pour VGPC à usage unique EVA

Box of 6 | Stérile: Oui



8300.20G01

Pack gravité pour vitrectomie 20G EVA

Box of 6 | Stérile: Oui



Chaque pack comprend :

- 8100.CAR01 : Cassette EVA avec poche de recueil de 0,5 l
- 8110.AFD01 : Double tubulure fluide-air à usage unique EVA
- 8110.DRA01 : Champs à usage unique EVA
- 51.5230 : Lame MVR 20G, droite
- 8267.VIT20 : Vitrectome grande vitesse 20G/8000 CPM à usage unique
- 3269.SBS : Sonde d'endo-illumination grand champ anti reflet avec dépresseur scléral lumineux (20G/0,9 mm)
- 1279.IA20 : Ligne d'infusion universelle en silicone pour système de canules 20G/0,9 mm
- 8110.ACCS : Kit d'accessoires à usage unique EVA
- 1271.D2 Bouchons scléraux 19GA/20GA

8300.25G01

Pack gravité pour vitrectomie 25G EVA

Box of 6 | Stérile: Oui



Chaque pack comprend :

- 8100.CAR01 : Cassette EVA avec poche de recueil de 0,5 l
- 8110.AFD01 : Double tubulure fluide-air à usage unique EVA
- 8110.DRA01 : Champs à usage unique EVA
- 8267.VIT23 : Vitrectome grande vitesse 25G/8000 CPM à usage unique
- 3269.SBS05 : Sonde d'endo-illumination grand champ anti reflet avec dépresseur scléral lumineux (25G/0,5 mm)
- 1272.ED205 : Système de canules insertion en un temps à usage unique. (25G/0,5 mm)
- 8110.ACCS : Kit d'accessoires à usage unique EVA

8300.27G01

Pack gravité pour vitrectomie 27G EVA

Box of 6 | Stérile: Oui



Chaque pack comprend :

- 8100.CAR01 : Cassette EVA avec poche de recueil de 0,5 l
- 8110.AFD01 : Double tubulure fluide-air à usage unique EVA
- 8110.DRA01 : Champs à usage unique EVA
- 8267.VIT27 : Vitrectome grande vitesse 27G/8000 CPM à usage unique
- 3269.SBS04 : Sonde d'endo-illumination grand champ anti reflet avec dépresseur scléral lumineux (27G/0,4 mm)
- 1272.ED204 : Système de canules insertion en un temps à usage unique. (27G/0,4 mm)
- 8110.ACCS : Kit d'accessoires à usage unique EVA

8300.20G02

Pack VGPC pour vitrectomie 20G EVA

Box of 6 | Stérile: Oui



Chaque pack comprend :

- 8100.CAR01 : Cassette EVA avec poche de recueil de 0,5 l
- 8110.AFD01 : Double tubulure fluide-air à usage unique EVA
- 8110.DRA01 : Champs à usage unique EVA
- 8110.VGP01 : Perfuseur pour VGPC à usage unique EVA
- 51.5230 : Lame MVR 20G, droite
- 8267.VIT20 : Vitrectome grande vitesse 20G/8000 CPM à usage unique
- 3269.SBS : Sonde d'endo-illumination grand champ anti reflet avec dépresseur scléral lumineux (20G/0,9 mm)
- 1279.IA20 : Ligne d'infusion universelle en silicone pour système de canules 20G/0,9 mm
- 8110.ACCS : Kit d'accessoires à usage unique EVA
- 8300.20G01 Bouchons scléraux 19GA/20GA

8300.23G02

Trousse d'entrée VGPC pour vitrectomie 23G EVA

Box of 6 | Stérile: Oui



Chaque pack comprend :

- 8100.CAR01 : Cassette EVA avec poche de recueil de 0,5 l
- 8110.AFD01 : Double tubulure fluide-air à usage unique EVA
- 8110.DRA01 : Champs à usage unique EVA
- 8110.VGP01 : Perfuseur pour VGPC à usage unique EVA
- 8267.VIT23 : Vitrectome grande vitesse 23G/8000 CPM à usage unique
- 3269.SBS06 : Sonde d'endo-illumination grand champ anti reflet avec dépresseur scléral lumineux (23G/0,6 mm)
- 1272.ED206 : Système de canules insertion en un temps à usage unique. (23G/0,6 mm)
- 8110.ACCS : Kit d'accessoires à usage unique EVA

8300.25G02

Pack VGPC pour vitrectomie 25G EVA

Box of 6 | Stérile: Oui



Chaque kit comprend :

- 8100.CAR01 : Cassette EVA avec poche de recueil de 0,5 l
- 8110.AFD01 : Double tubulure fluide-air à usage unique EVA
- 8110.DRA01 : Champs à usage unique EVA
- 8110.VGP01 : Perfuseur pour VGPC à usage unique EVA
- 8267.VIT25 : Vitrectome grande vitesse 25G/8000 CPM à usage unique
- 3269.SBS05 : Sonde d'endo-illumination grand champ anti reflet avec dépresseur scléral lumineux (25G/0,5 mm)
- 1272.ED205 : Système de canules insertion en un temps à usage unique. (25G/0,5 mm)
- 8110.ACCS : Kit d'accessoires à usage unique EVA

8300.23G01

Pack gravité pour vitrectomie 23G EVA

Box of 6 | Stérile: Oui



Chaque pack comprend :

- 8100.CAR01 : Cassette EVA avec poche de recueil de 0,5 l
- 8110.AFD01 : Double tubulure fluide-air à usage unique EVA
- 8110.DRA01 : Champs à usage unique EVA
- 8267.VIT23 : Vitrectome grande vitesse 23G/8000 CPM à usage unique
- 3269.SBS06 : Sonde d'endo-illumination grand champ anti reflet avec dépresseur scléral lumineux (23G/0,6 mm)
- 1272.ED206 : Système de canules insertion en un temps à usage unique. (23G/0,6 mm)
- 8110.ACCS : Kit d'accessoires à usage unique EVA

8100.CAR03

EVA Cartridge with 0.5 L Collection Bag VGPC Input

Box of 6 | Stérile: Oui



8310.27S12

EVA TDC Vitrectomy Pack VGPC Input 27G, Ultra Short

Code couleur: ●

6 packs/box | Stérile: Oui



Includes:

- 27G Ultra™ Short Instruments, optimised for challenges of smaller eyes (8310.27KS): Cannula System with high Flow Infusion Line, TDC Cutter, SBS Light Fiber
- Disposable EVA Air Fluid Dual Tubing
- Disposable EVA VGPC Input Set (8110.VGP01)
- Male/male luer connector | Female/female luere connector (8110.ACCS)
- EVA Cartridge with 0.5L Collection bag (8100.CAR11)
- Disposable EVA Drapes (8110.DRA01)

IRRIGATION/ASPIRATION

1270.B

Kit d'irrigation/aspiration bimanuel, 20G / 0,9 mm

Set/2 | Stérile: Non



8400.IA28

Pièce à main d'irrigation/aspiration, 19G, à extrémité angulée à 45°, pour incision de 2,8 mm, tête d'aspiration rugueuse

Code couleur: ●

Box/10 | Stérile: Oui



8400.IA25
Pièce à main d'irrigation/aspiration, 20G, à extrémité angulée
à 45°, pour incision de 2,5 mm, tête d'aspiration polie
Box/10 | Stérile: Oui



8400.IA20
Pièce à main d'irrigation/aspiration, 23G, à extrémité angulée
à 45°, pour incision de 2,0 mm, tête d'aspiration polie
Code couleur:  Box/10 | Stérile: Oui




1273.EPA
Embout courbe avec manchon de silicone pour pièce à main
I/A 1273-EH
Box/1 | Stérile: Non



1273.ES
Embout droit pour pièce à main I/A 1273-EH
Box/1 | Stérile: Non



8400.IA22
Pièce à main d'irrigation/aspiration, 21G, à extrémité angulée
à 45°, pour incision de 2,2 mm, tête d'aspiration polie
Code couleur:  Box/10 | Stérile: Oui

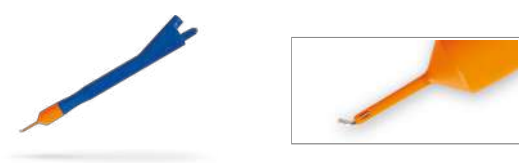

8400.BIA12
Pièce à main d'aspiration à pointe texturée et pièce à main
d'irrigation à double port d'irrigation latéral, pour incision de
1,2 mm.
Box of 10 | Stérile: Oui



INJECTION/EXTRACTION

1363.DD
Kit VFI pour seringues à huile de silicone D.O.R.C.
Box/5 | Stérile: Oui



1279.VFI
Ligne d'infusion universelle en PVC pour système de canules
23G pour VFI/VFE
Box/5 | Stérile: Oui



1272.HSE06

Canule pour extraction d'huile de silicone de haute viscosité,

23G

Box/6 | Stérile: Oui



- Spécialement adaptée pour l'élimination de l'huile de silicone de haute viscosité.
- Canule plus longue pour faciliter l'élimination des fluides de haute densité

ÉCHANGE AIR-FLUIDES

1250.ABD

Tubulures à usage unique complètes avec filtre pour échange

air-fluides

Box/6 | Stérile: Oui



1250.B

Tubulures à usage unique à connecteur luer lock pour échange

air-fluides

Box/6 | Stérile: Oui



DIATHERMIE

1120.A

Câble de diathermie

Box/1 | Stérile: Non



Câble de diathermie pour poignées 1120 / 1121 / 1122 / 1120-0.5 / 1120-D-0.5 et 1120-0.6

1120.05

Manche d'endo-diathermie, droite, extrémité pointue, (25

gauge / 0.5mm)

Box/1 | Stérile: Non



1120.06

Manche d'endo-diathermie, droite, extrémité pointue, (23

gauge / 0.6 mm)

Box/1 | Stérile: Non



1120.04

Endo-diathermy handle, straight pointed tip 27 Gauge/0.4 mm

Box/1 | Stérile: Non



1115

Pince pour coagulation bipolaire, 12 cm, angulée, sans câble

Box/1 | Stérile: Non



1122

Manche pour exo-diathermie avec embout incurvé à 45°,
diamètre 1,3 mm

Box/1 | Stérile: Non



1115.A

Câble pour diathermie pour pinces 1115 et 1116

Box/1 | Stérile: Non




LASER ACCESSOIRES

8005.F1

Filtre de sécurité pour microscopes Zeiss/Moeller-Wedel,
manuel

Box of 1 | Stérile: Non

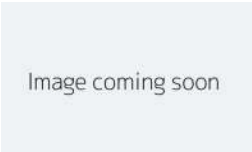


Manual Safety Filter (ZEISS)

8005.F2

Filtre de sécurité pour microscopes Leica, manuel

Box of 1 | Stérile: Non

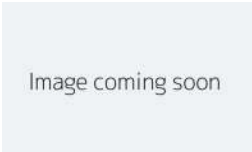


Manual Safety Filter (LEICA)

8005.F3

Filtre de sécurité pour microscopes Zeiss/Moeller-Wedel, passif

Box of 1 | Stérile: Non

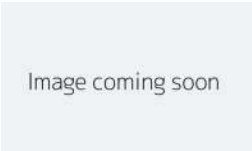


Passive Safety Filter (ZEISS)

8005.F4

Filtre de sécurité pour microscopes Leica, passif

Box of 1 | Stérile: Non

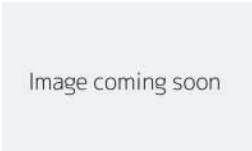

Passive Safety Filter (LEICA)

AUTRES ACCESSOIRES

1040

Kusaka Scleral Depressor

1286.SS

Boîte de stérilisation : pour 1 micropince/ciseaux

Box/1 | Stérile: Non

Box/1 | Stérile: Non



Specially designed scleral depressor to be used in combination with trocar/cannula systems. Angled depressor tip for more flexibility with wide angle viewing system.



1286.CAP3



Capuchon de protection pour microforceps et ciseaux

8000.DUC01

Housse antipoussière EVA - Accessoire pour système EVA

Box/1 | Stérile: Non

Box of 1 | Stérile: Non

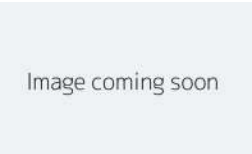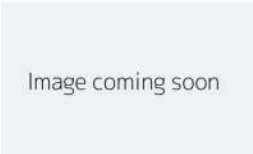

Ce capuchon protège les micropinces et microciseaux délicats tout en permettant l'identification de la pointe de l'instrument.

8000.FLC01


Malette de transport EVA - Accessoire pour système EVA

8000.MAY01

Bras Mayo EVA - Accessoire pour système EVA

Box of 1 | Stérile: Non

Box of 1 | Stérile: Non

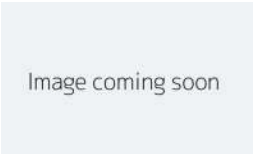

INSTRUMENTS

USAGE UNIQUE 23G

SYSTÈME TRANSCONJONCTIVAL

ONE STEP

1272.ED206 Système de canules un temps à usage unique (23G / 0,6 mm)

Code couleur: ● Box/5 | Stérile: Oui



- Caractéristiques et avantages :
- Nouvelle lame RVM révolutionnaire Nécessite une pression d'insertion plus de 50% inférieure.
 - Arguments de vente exclusifs Valve de fermeture translucide exclusive nouvellement développée garantissant la visibilité lors de l'introduction des instruments.
 - Developed in cooperation with Prof. Dr. Szurman

TWO STEP

1272.ERPP6 Valves de fermeture pour système de vitrectomie 23G Set/4 | Stérile: Oui



1279.P Ligne d'infusion pour canule d'infusion 23G / 0,6 mm 1272-ERPP2 Box/6 | Stérile: Oui



- Également pour pièces à main 1281 AS, 1281 AS/ST et 1281 T.
- Avec connecteur luer-lock.

1272.ED06 Système de vitrectomie en deux étapes 23G / 0,6mm à usage unique

Code couleur: ● Box/5 | Stérile: Oui



- Constitué de :
- 3 x inserteurs mousses préchargés avec canules universelles,
 - valves de fermeture
 - 1 x ligne d'infusion universelle

VITRECTOMES

STANDARD

1267.NMD06 **Vitréotome pneumatique à usage unique 23G / 0,6 mm**
(fonctionnant à 30 PSI, max. 1500 coups/min)


Box/6 | Stérile: Oui



Compatible avec la plupart des appareils fonctionnant à 30 PSI avec connecteur luer-lock. Max. 1500 coups/min.

2267.NMD06 **Vitréotome à haute vitesse, 23G / 0,6 mm (2500 coups)**

Box/6 | Stérile: Oui

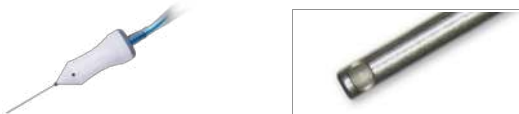

- Vitréotome pneumatique 2500 coups : vitréotome de 3ème génération à haut débit et à grande vitesse.
- Pour la plupart des appareils de vitrectomie fonctionnant sous 37 PSI, 23G / 0,6 mm.
- Port d'aspiration le plus proche de l'extrémité.
- Débit d'aspiration accru
- Rigidité accrue de la gaine. 2500 coups/min.

8267.VIT23 **Vitréotome grande vitesse 23G/8000 CPM à usage unique**

Code couleur: ● Box of 6 | Stérile: Oui



TDC

6268.NMD06 **Vitréotome à usage unique à haute vitesse TDC 23G / 6000 CPM, gamme DORC Continuum**

Code couleur: ● Box/6 | Stérile: Oui



Indications :
Élimination rapide et sûre du vitré

Caractéristiques et avantages :

- PLUS SÛR : La double vitesse de coupe diminue la traction sur les tissus environnants.
- PLUS RAPIDE : Le cycle de fonctionnement de 92% génère un débit d'aspiration constant indépendant de la vitesse de coupe.
- Débit d'aspiration ACCRU, jusqu'à trois fois supérieur au débit usuel.
- MEILLEUR : Réduction des turbulences liées aux variations de flux au niveau du port d'aspiration grâce à l'ouverture constante du port d'aspiration.

8268.VIT23 **Vitréotome à usage unique à haute vitesse TDC 23G / 8000 CPM, gamme DORC Continuum**

Code couleur: ● Box/6 | Stérile: Oui



Indications :
• Élimination rapide et sûre du vitré

Caractéristiques et avantages :

- PLUS SÛR : La double vitesse de coupe diminue la traction sur les tissus environnants.
- PLUS RAPIDE : Le cycle de fonctionnement de 92% génère un débit d'aspiration constant indépendant de la vitesse de coupe.
- Débit d'aspiration ACCRU, jusqu'à trois fois supérieur au débit usuel.
- MEILLEUR : Réduction des turbulences liées aux variations de flux au niveau du port d'aspiration grâce à l'ouverture constante du port d'aspiration.


MICROFORCEPS/MICROCISEAUX

1286.CD06 **Micropince à usage unique : à mors striés, 23G / 0,6 mm**
Code couleur: ● Box/5 | Stérile: Oui



- Pince à pointe mousse dont toute la surface interne de l'extrémité est striée.
- Pour la saisie de membranes en général.

1286.MD06 **Microciseaux à usage unique : courbes horizontaux, 23G / 0,6 mm**
Code couleur: ● Box/5 | Stérile: Oui

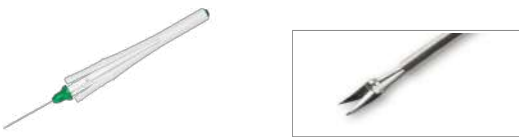


- Ciseaux pointus avec courbure horizontale de 12 mm pour s'ajuster au contour de la rétine.
- Pour couper dans un plan parallèle à la rétine, couper des membranes qui adhèrent à la surface rétinienne et pour toute opération de coupe de membranes.

1286.WD06 **Micropince à usage unique : Eckardt à griffes, 23G / 0,6 mm**
Code couleur: ● Box/5 | Stérile: Oui



- Micropince à griffes ; pour une saisie précise et une meilleure visualisation des membranes fines dans la région maculaire.
- La pince ILM la plus utilisée !
- Développé en collaboration avec le Prof. Dr Claus Eckardt.

1286.ED06 **Micro-ciseaux à usage unique : verticaux, 23G / 0,6 mm**
Code couleur: ● Box/5 | Stérile: Oui

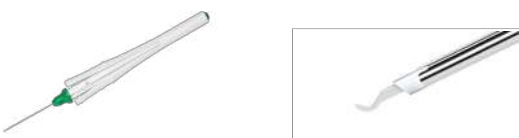

- Ciseaux pointus à effet de coupe vertical.
- Le bord inférieur de la lame des ciseaux est arrondi pour limiter une pénétration accidentelle de la rétine.

1286.ILMD6 **Micro-pince à usage unique pour ILM, 23G / 0,6 mm**
Code couleur: ● Box/5 | Stérile: Oui



- Instrument à pointes fines pour une saisie et une élimination précises de la membrane et de la limitante interne.
- Une meilleure visualisation des fines membranes dans la région maculaire.

2286.KD06 **Micropince à usage unique : Asymétrique à griffes 23G / 0,6 mm**
Code couleur: ● Box/5 | Stérile: Oui



2286.CD306 **Pince à mors striés de Shah 23G**
Code couleur: ● Box/5 | Stérile: Oui



Pelage de la membrane limitante interne et pelage de membranes standard 23G

INSTRUMENTS À DÉBIT RÉTROGRADE

1281.SD06 Canule Backflush de Shiraga à embout en brosse extensible et aspiration active 23G / 0,6 mm


Box/5 | Stérile: Oui



2281.AD06 Backflush avec embout mousse 23G / 0,6 mm

Code couleur: ●


Box/5 | Stérile: Oui

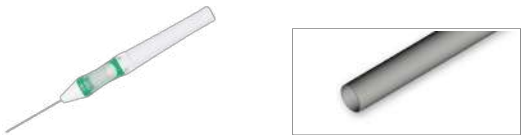

- Nouveau manche ergonomique pour un contrôle chirurgical optimal.
- Réservoir backflush de plus grande capacité.
- Aspiration globalement mieux contrôlée et plus précise des fluides intraoculaires.

1281.BTDH6 Backflush à usage unique pour œil fortement myope avec embout brosse et aspiration active (23G / 0,6 mm)

Box/5 | Stérile: Oui

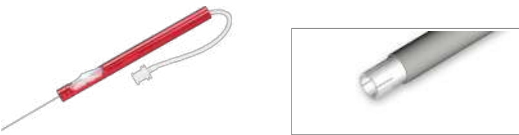

Indications :

- Pour interventions sur des yeux fortement myopes.

Caractéristiques et avantages :

- Disponible en 23G et 25G.


Arguments de vente exclusifs

- Tige plus longue de cinq millimètres que celle d'une pince standard.

2281.STD06 Backflush instrument with 23ga/0.6 mm soft-tip cannula and active aspiration

Code couleur: ●

Box/5 | Stérile: Oui

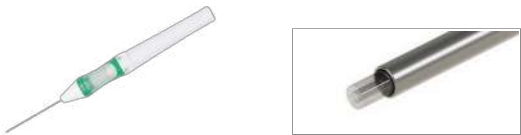


- Conception fine pour un déplacement et un contrôle plus aisés.
- Taille réduite de la poignée.
- Meilleur débit d'aspiration pour de hauts niveaux de vide, en particulier pour les plus faibles diamètres.
- Nécessite moins de force pour activer le réservoir.
- Réservoir de plus grande capacité.

2281.BTD06 Backflush avec embout brosse 23G / 0,6 mm, aspiration active

Code couleur: ●

Box/5 | Stérile: Oui

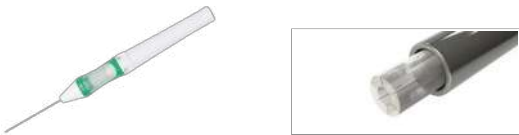

- Nouveau manche ergonomique pour un contrôle chirurgical optimal.
- Réservoir backflush de plus grande capacité.
- Aspiration globalement mieux contrôlée et plus précise des fluides intraoculaires.

ÉCLAIRAGE INTRAOCULAIRE

3269.D06 Sonde pour endo-illumination, 23G / 0,6 mm, avec dépresseur scléral lumineux

Code couleur: ● Box/6 | Stérile: Oui



Accessoires stériles pour phacoémulsification

3269.E06 Sonde pour endo-illumination TotalView, 23G / 0,6 mm, à 2 pointes échangeables

Code couleur: ● Box/6 | Stérile: Oui



Avec commande réglable de la fibre optique/de l'intensité lumineuse, comprenant :

- Embout lumineux en pic à spatule,
- embout d'endo-illumination combiné standard
- et TotalView

3269.EB06 Eclairage Totalview pour système de vitrectomie 23G / 0,6 mm

Code couleur: ● Box/6 | Stérile: Oui



- Fibre optique TotalView avec fixation pour canule polyimide.
- Longueur de l'extrémité de la fibre optique réglable.

3269.SB06 Sonde pour endo-illumination TotalView Spaide, 23G / 0,6 mm

Code couleur: ● Box/6 | Stérile: Oui



Embout de conception exclusive associant éclairage direct et éclairage diffus à large champ.

3269.SBS06 Sonde pour endo-illumination anti-reflet TotalView, 23G / 0,6 mm, avec dépresseur scléral lumineux

Code couleur: ● Box/6 | Stérile: Oui



3269.B06 Sonde pour endo-illumination TotalView, 23G / 0,6 mm, avec dépresseur scléral lumineux

Code couleur: ● Box/6 | Stérile: Oui



Sonde à fibre optique avec fibre de forme conique pour un champ d'illumination plus large.

3269.MF06

Combiné multifibre sonde d'endo-illumination / Chandelier

Eckardt 23G

Code couleur:

Box/6 | Stérile: Oui



- Instrument multifonctions
- Un même instrument standard pour l'endo-illumination ou l'illumination par chandelier
- Chirurgie bimanuelle
- Illumination de type TotalView


SONDES LASER

SONDES LASER INCRÉMENTIELLES COURBES

7511.IRI

Sonde laser éfilée, 23G / 0,6 mm avec connecteur Iridex®

Box/6 | Stérile: Oui

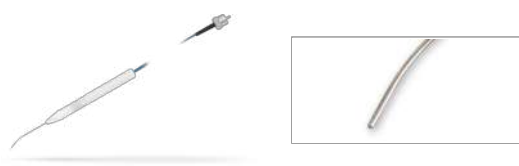


- Embout courbe flexible pour accéder à la périphérie de la rétine.
- Embout conique pour 23G à 27G.
- Technologie plus économique.
- Convient pour la plupart des systèmes de trocars 23G.

7511.DORC

Sonde laser éfilée, 23G / 0,6 mm avec connecteur DORC®

Box/6 | Stérile: Oui

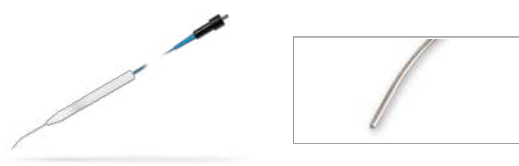


- Embout courbe flexible pour accéder à la périphérie de la rétine.
- Embout conique pour 23G à 27G.
- Technologie plus économique.
- Convient pour la plupart des systèmes de trocars 23G.

7511.ALC

Sonde laser éfilée, 23G / 0,6 mm avec connecteur Alcon®

Box/6 | Stérile: Oui

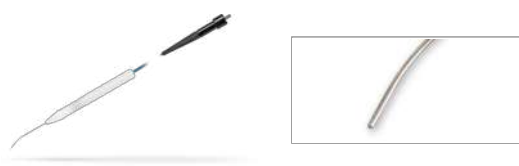


- Embout courbe flexible pour accéder à la périphérie de la rétine.
- Embout conique pour 23G à 27G.
- Technologie plus économique.
- Convient pour la plupart des systèmes de trocars 23G.

SONDES LASER DIRECTIONNELLES

7223.HGM Sonde laser directionnelle, avec connecteur HGM®, 23G /
0,6 mm


Code couleur: ● Box/6 | Stérile: Oui

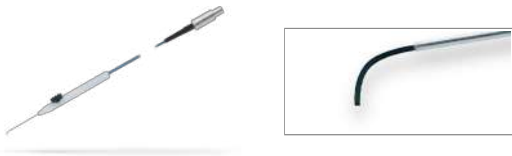

(Non disponible aux Etats-Unis)

7223.IRI Sonde laser directionnelle, avec connecteur Iridex®, 23G /
0,6 mm


Code couleur: ● Box/6 | Stérile: Oui

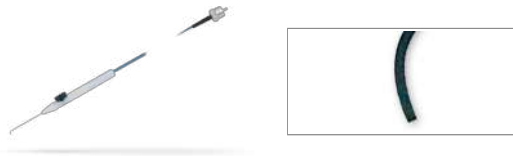

(Non disponible aux Etats-Unis)

7223.DORC Sonde laser directionnelle, avec connecteur DORC®, 23G /
0,6 mm

Code couleur: ● Box/6 | Stérile: Oui

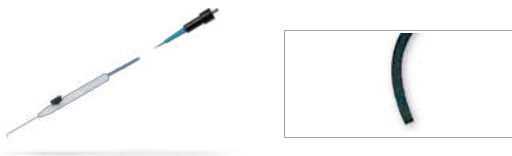

(Non disponible aux Etats-Unis)

7223.ALC Sonde laser directionnelle, avec connecteur Alcon®, 23G /
0,6 mm

Code couleur: ● Box/6 | Stérile: Oui




(Non disponible aux Etats-Unis)

SONDES LASER STANDARD, DROITES


7123.IRI Sonde laser, droite, avec connecteur Iridex®, 23G / 0,6 mm

Box/6 | Stérile: Oui

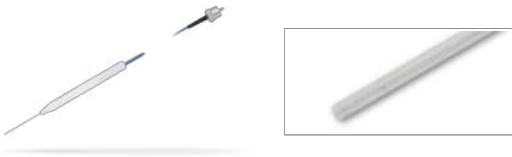

7123.DORC Sonde laser, droite, avec connecteur DORC®, 23G / 0,6 mm


Box/6 | Stérile: Oui

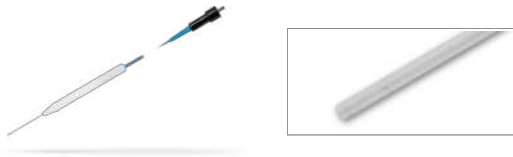

(Non disponible aux Etats-Unis)

7123.ALC Sonde laser, droite, avec connecteur Alcon®, 23G / 0,6 mm


Box/6 | Stérile: Oui

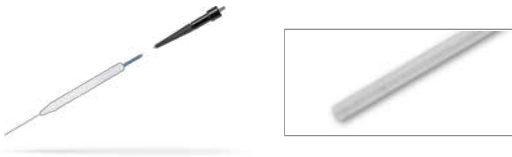

SONDES LASER INCRÉMENTIELLES LUMINEUSES


7510.DORC Sonde laser endoilluminée incrémentielle, courbe à pointe conique, pour utilisation avec le système pour vitrectomie 23G / 0,6 mm

Code couleur: ● Box/6 | Stérile: Oui

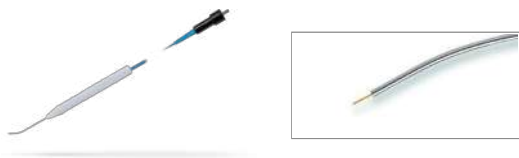


7510.ALC Sonde laser endoilluminée incrémentielle, 23G / 0,6 mm, avec connecteur Alcon®

Code couleur: ● Box/6 | Stérile: Oui

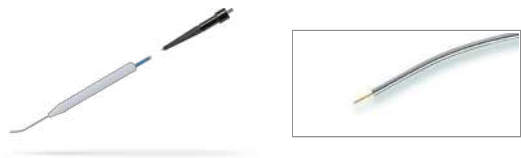

7510.IRI Sonde laser lumineuse incrémentielle courbe, 23G / 0,6 mm, à embout conique, avec connecteur Iridex.

Box/6 | Stérile: Oui

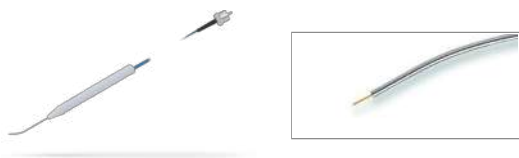

Non disponible aux Etats-Unis

CONSOMMABLES DIVERS

1270.EXT Aiguille pour injection sous-rétinienne 41G extensible , 23G / 0,6 mm

Box/5 | Stérile: Oui



Permet l'injection sous-rétinienne contrôlée de TPA.

1272.ILM06 Aiguille ILM micro pick, 23G / 0,6 mm

Box/5 | Stérile: Oui



1272.SD23 Canule à pointe souple avec connecteur luer lock, 23G / 0,6 mm

Box/5 | Stérile: Oui



1272.SDT23 Canule à pointe souple recouverte de poussière de diamant Spaide, 23G / 0,6 mm

Box/5 | Stérile: Oui



Pour élimination de la triamcinolone.

1272.VFI06 Canule VFI à embout polyimide de 7 mm à paroi mince(23G / 0.6 mm)

Box/5 | Stérile: Oui



1290.ECS06 Spatule courbe extensible Pertile 23G / 0,6 mm.

Code couleur: ● Box/5 | Stérile: Oui



1279.IA Ligne d'infusion universelle en silicone pour système de canules 23G

Box/5 | Stérile: Oui



Convient pour irrigation.

1279.IAR Ligne d'infusion universelle en silicone pour système de canules 23G

Set/5 | Stérile: Non



Convient pour irrigation, y compris VFI/VFE.

1290.BTD23 Canule Backflush à embout brosse extensible à aspiration active 23G / 0,6 mm

Code couleur: ● Box/5 | Stérile: Oui



- Canule Backflush avec embout brosse en silicone pour aspiration passive avec «brossage» atraumatique simultané de la surface rétinienne.
- Peut également s'utiliser pour le repositionnement des plis ou des déchirures de la rétine.

1281.CD27 Embout Backflush à pointe conique de 23G à 27G pour utilisation avec la canule Backflush 1281-C

Box/10 | Stérile: Oui



1290.DSS06 Sweeper recouvert de poussière de diamant, 23G / 0,6 mm

Box/5 | Stérile: Oui



- Manipulateur à extrémité en silicone recouvert de poussière de diamant.
- «Balayage» des tissus pour ILM, PVR, rotation maculaire et autres manipulations des tissus.
- Non disponible aux Etats-Unis.

1290.EXS23 Sweeper extensible recouvert de poussière de diamant, 23G / 0,6 mm

Code couleur: ● Box/5 | Stérile: Oui




- Manipulateur à extrémité en silicone recouvert de poussière de diamant.
- «Balayage» des tissus pour ILM, PVR, rotation maculaire et autres manipulations des tissus.
- Non disponible aux Etats-Unis.

1279.HF

Ligne d'infusion à haut débit pour systèmes de canules 20, 23, 25 et 27G

Box/6 | Stérile: Oui

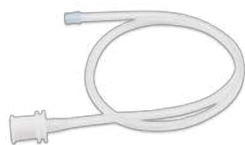

1279.VFI

Ligne d'infusion universelle en PVC pour système de canules 23G pour VFI/VFE

Box/5 | Stérile: Oui



RÉUTILISABLES 23G

SYSTÈME TRANSCONJONCTIVAL

1272.E06

Système de canules réutilisables en deux étapes

Set | Stérile: Non



Système de canules 23G Eckardt
Constitué de :

- 5x canules universelles
- valves de fermeture (boîte de 4, stériles)
- 3x bouchons de fermeture (longs)
- 3 x bouchons de fermeture (courts)
- 3 x inserteurs mousses
- 1 x ligne d'infusion universelle
- boîte de stérilisation

REMARQUE : Plateau de pression 2115 et pince pour canule 23G Eckardt 1278 non incluses dans le kit.

1272.ERPP1

Canule universelle réutilisable, 23G / 0,6 mm

Set/2 | Stérile: Non



1272.ERPP2

Canule d'infusion réutilisable, 23G / 0,6 mm, avec embout de 3,6 mm

Set/2 | Stérile: Non



1272.ERPP3

Bouchons de fermeture longs réutilisables, 23G / 0,6 mm

Set/2 | Stérile: Non



1272.ERPP7 Canules d'infusion réutilisables avec embout de 5,5 mm et
inserteurs mousses
Set/2 | Stérile: Non



2115 Plateau de pression Eckardt, 23G / 0,6 mm
Box/1 | Stérile: Non



- Plateau de pression pour plaquer la conjonctive à la sclère pendant l'incision et la procédure d'insertion de la canule.
- Cet instrument est basé sur une idée originale du Dr. Robert G. Josephberg, NY - USA

MICROFORCEPS/MICROCISEAUX

1286.B06 Micropince à griffes, 23G / 0,6 mm
Code couleur: ● ● Box/1 | Stérile: Non



- Pince à pointe mousse dotée d'une petite plate-forme de prise sur chaque extrémité.
- Pour saisir des membranes fines ou des membranes qui adhèrent à la surface rétinienne.

1286.C06 Micropince : à mors striés, 23G / 0,6 mm
Code couleur: ● ● Box/1 | Stérile: Non



- Pince à pointe mousse dont toute la surface interne de l'extrémité est striée.
- Pour la saisie de membranes en général.

1286.E06 Microciseaux : verticaux, 23G / 0,6 mm
Code couleur: ● ● Box/1 | Stérile: Non



- Ciseaux verticaux à effet de coupe.
- Le bord inférieur de la lame des ciseaux est arrondi pour limiter l'engagement accidentel de la rétine.

1286.J06 Microciseaux : droits, 23G / 0,6 mm
Code couleur: ● ● ● Box/1 | Stérile: Non



- Ciseaux droits pointus.
- Pour couper dans le plan de l'iris ou couper les membranes périphériques.

1286.M06 Microciseaux : courbes horizontaux, 23G / 0,6 mm
Code couleur: ● ● Box/1 | Stérile: Non



- Ciseaux pointus avec courbure horizontale de 12 mm pour s'ajuster au contour de la rétine.
- Pour couper dans un plan parallèle à la rétine, couper des membranes qui adhèrent à la surface rétinienne et pour toute opération de coupe de membranes.

1286.W06 Micropince : Eckardt à griffes, 23G / 0,6 mm
Code couleur: ● ● ● Box/1 | Stérile: Non



- Micropince à griffes ; pour une saisie précise et une meilleure visualisation des membranes fines dans la région maculaire.
- La pince ILM la plus utilisée !
- Développé en collaboration avec le Prof. Dr Claus Eckardt.

1286.DIA06 **Micropince : recouvert de poussière de diamant, 23G / 0,6 mm**

Code couleur: ● ● ●

Box/1 | Stérile: Non



2286.K06 **Micropince : à griffe asymétrique, 23G / 0,6 mm**

Code couleur: ● ●

Box/1 | Stérile: Non



La micropince asymétrique de Tano a une pointe décalée pour permettre une visualisation optimale sur toute la longueur de la pointe. Conception de la pointe convenant pour membrane limitante interne, fines membranes épitréiniennes et membranes diabétiques ou PVR. Excellent instrument multiusage. Les plates-formes intérieures à griffes sont légèrement rugueuses pour une prise solide. Extrémité et gaine antireflet pour une visualisation encore meilleure.

1286.WP06 **Micro-pince d'Eckardt à extrémités renforcées, 23G / 0,6 mm**

Code couleur: ● ● ●

Box/1 | Stérile: Non



- Instrument avec des extrémités en "tenailles" pour le pelage des membranes et de la limitante interne.
- La longueur de la pointe de l'instrument est réduite de 50% par rapport au modèle 1286.W.
- La force de prise est augmentée de 200% par rapport au modèle 1286.W.

1286.ILM06 **Micro-pince pour ILM, 23G / 0,6 mm**

Code couleur: ● ● ●

Box/1 | Stérile: Non



- Instrument à pointes fines pour une saisie et une élimination précises de la membrane et de la limitante interne.
- Une meilleure visualisation des fines membranes dans la région maculaire.

2286.O06 **Spatule incurvée Ovale / microciseaux**

Code couleur: ● ● ●

Box/1 | Stérile: Non



1286.WH06 **Micropince d'Eckardt à plateau pour œil fortement myope (23G / 0,6 mm)**

Code couleur: ● ● ●

Box/1 | Stérile: Non



- Indications : Pour interventions sur des yeux fortement myopes.
- Caractéristiques et avantages : Disponible en 23G et 25G.
- Arguments de vente exclusifs Tige plus longue de cinq millimètres que celle d'une pince standard.

1286.ABF

Micropinçe : pour des procédures de biopsie précises, contrôlées
et faiblement invasives, 23G / 0,6 mm

Box/1 | Stérile: Non



- Instrument de conception exclusive pour des procédures de biopsie précises, contrôlées et faiblement invasives, 23G / 0,6 mm.
- Le concept faiblement invasif garantit un minimum de complications et des résultats de biopsie optimaux.
- Une biopsie sans dommages aux structures cellulaires permet un diagnostic histologique optimal et évite la nécessité de répéter la procédure de biopsie.
- Développé en collaboration avec le Prof. N. Bornfeld et le Dr H. Akgül de l'Hôpital universitaire d'Essen, Allemagne.
- Indications :Biopsie iridienneBiopsie choroidienne

INSTRUMENTS A DEBIT RETROGRADE

1281.A506

Aiguille de rechange pour canule Backflush , droite, 23G /
0,6 mm

Box/1 | Stérile: Non




Pour canules Backflush 1281-A/B.

1281.A5D06

Aiguille de rechange pour canule Backflush , droite, 23G /
0,6 mm, pour canule Backflush 1281-C


Box/1 | Stérile: Oui

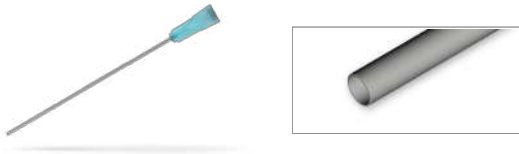

1281.B1D06

Embout brosse de rechange pour canule Backflush 23G /
0,6 mm

Box/10 | Stérile: Oui

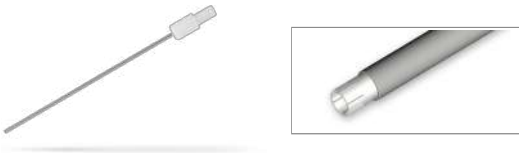

Pour canules Backflush 1281-A/B.

1281.C

Canule Backflush Eckardt 23G / 0,6 mm

Box/1 | Stérile: Non



- Canule Backflush à réservoir de grand volume pour accroître la capacité de débit rétrograde.
- Connecteur luer-lock pour aiguilles Backflush. Aiguille droite mousse 23G/ 0,6 mm.

1281.C1

Réervoir de rechange pour Canules Backflush 1281-C

Set/10 | Stérile: Non



1281.CD27

Embout Backflush à pointe conique de 23G à 27G pour utilisation avec la canule Backflush 1281-C

Box/10 | Stérile: Oui



1281.BD27

Embout Backflush avec pointe conique de 23G à 27G pour utilisation avec les canules Backflush classiques D.O.R.C.

Box/10 | Stérile: Oui



INSTRUMENTS À MEMBRANE

1292.E06

Pic à membrane Eckardt, 23G / 0,6 mm

Code couleur: ● ●

Box/1 | Stérile: Non



Pic à membrane formant un angle de 100° avec extrémité distale conique jusqu'à 0,3 mm pour une meilleure visualisation et une délamination précise des membranes.

DIATHERMIE

1120.A

Câble de diathermie

Box/1 | Stérile: Non



Câble de diathermie pour poignées 1120 / 1121 / 1122 / 1120-0.5 / 1120-D-0.5 et 1120-0.6

1120.06

Manche d'endo-diathermie, droite, extrémité pointue, (23 gauge / 0.6 mm)

Box/1 | Stérile: Non



USAGE UNIQUE 25G

SYSTÈME TRANSCONJONCTIVAL

1272.ED205

Système de canules un temps à usage unique (25G / 0,5 mm)

Code couleur:

Box/5 | Stérile: Oui



- Caractéristiques et avantages :
- Nouvelle lame RVM révolutionnaire Nécessite une pression d'insertion plus de 50% inférieure.
 - Arguments de vente exclusifs Valve de fermeture translucide exclusive nouvellement développée garantissant la visibilité lors de l'introduction des instruments.
 - Developed in cooperation with Prof. Dr. Szurman

VITRECTOMES

STANDARD

1267.NMD05

Vitréotome pneumatique à usage unique 25G / 0,5 mm
(fonctionnant à 30 PSI, max. 1500 coups/min)

Box/6 | Stérile: Oui




Compatible avec la plupart des appareils fonctionnant à 30 PSI (connecteur luer-lock).Max. 1500 coups/min.

2267.NMD05

High-Speed Vitrectome, 25 Gauge/0.5 mm (2500 cuts)

Box/6 | Stérile: Oui

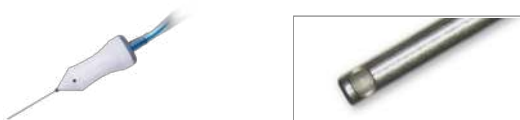

8267.VIT25

Vitréotome grande vitesse 25G/8000 CPM à usage unique

Code couleur: Box of 6 | Stérile: Non



TDC

6268.NMD05 Vitréotome à usage unique à haute vitesse TDC 25G / 6000 CPM, gamme DORC Continuum

Code couleur: ● Box/6 | Stérile: Oui



- Indications :
- Elimination rapide et sûre du vitré
- Caractéristiques et avantages :
- PLUS SÛR : La double vitesse de coupe diminue la traction sur les tissus environnants.
 - PLUS RAPIDE : Le cycle de fonctionnement de 92% génère un débit d'aspiration constant indépendant de la vitesse de coupe.
 - Débit d'aspiration ACCRU, jusqu'à trois fois supérieur au débit usuel.
 - MEILLEUR : Réduction des turbulences liées aux variations de flux au niveau du port d'aspiration grâce à l'ouverture constante du port d'aspiration.

8268.VIT25 Vitréotome à usage unique à haute vitesse TDC 25G / 8000 CPM, gamme DORC Continuum

Code couleur: ● Box/6 | Stérile: Oui




- Indications :
- Elimination rapide et sûre du vitré
- Caractéristiques et avantages :
- PLUS SÛR : La double vitesse de coupe diminue la traction sur les tissus environnants.
 - PLUS RAPIDE : Le cycle de fonctionnement de 92% génère un débit d'aspiration constant indépendant de la vitesse de coupe.
 - Débit d'aspiration ACCRU, jusqu'à trois fois supérieur au débit usuel.
 - MEILLEUR : Réduction des turbulences liées aux variations de flux au niveau du port d'aspiration grâce à l'ouverture constante du port d'aspiration.

MICROFORCEPS/MICROCISEAUX

1286.ED05 Microciseaux à usage unique : verticaux, 25G / 0,5 mm

Code couleur: ● Box/5 | Stérile: Oui

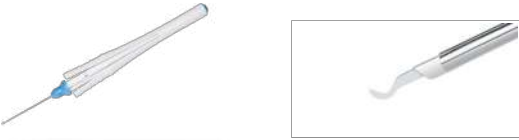

- Ciseaux verticaux à effet de coupe.
- Le bord inférieur de la lame des ciseaux est arrondi pour limiter l'engagement accidentel de la rétine.

1286.MD05 Microciseaux à usage unique : courbes horizontaux, 25G / 0,5 mm

Code couleur: ● Box/5 | Stérile: Oui



- Ciseaux pointus avec courbure horizontale de 12 mm pour s'ajuster au contour de la rétine.
- Pour couper dans un plan parallèle à la rétine, couper des membranes qui adhèrent à la surface rétinienne et pour toute opération de coupe de membranes.

1286.WD05 **Micropince à usage unique : Eckardt à griffes, 25G / 0,5 mm**

Code couleur: ●

Box/5 | Stérile: Oui



- Micropince à griffes ; pour une saisie précise et une meilleure visualisation des membranes fines dans la région maculaire.
- La pince ILM la plus utilisée !
- Développé en collaboration avec le Prof. Dr Claus Eckardt.

2286.KD05 **Micropinces à usage unique : à griffe asymétrique, 25G / 0,5 mm**

Code couleur: ●

Box/5 | Stérile: Oui




- La micropince asymétrique de Tano a une pointe décalée pour permettre une visualisation optimale sur toute la longueur de la pointe.
- Conception de la pointe convenant pour membrane limitante interne, fines membranes épirétiniennes et membranes diabétiques ou PVR.
- Excellent instrument multiusage. Les plates-formes intérieures à griffes sont légèrement rugueuses pour une prise solide.
- Extrémité et gaine antireflet pour une visualisation encore meilleure.

1286.ILMD5 **Micropince à usage unique pour ILM, 25G / 0,5 mm**

Code couleur: ●

Box/5 | Stérile: Oui

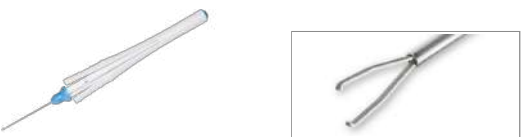

- Instrument à pointes fines pour une saisie et une élimination précises de la membrane et de la limitante interne.
- Une meilleure visualisation des fines membranes dans la région maculaire.

1286.SFD **Kit pour fixation sclérale d'IIO Scharioth, jeu de 2 pinces 25G, droite et courbe**

Code couleur: ●

Set/1 | Stérile: Oui



2286.CD305 **Disposable Microforceps Ultra peel 25 gauge / 0.5mm**

Code couleur: ●

Box/5 | Stérile: Oui



- Designed for single-movement peeling of thicker, more fibrotic membranes
- Blunt, rounded tip design and optimal shaft stiffness provides precise control for smaller gauge surgery


INSTRUMENTS À DÉBIT RÉTROGRADE

2281.AD05

Canule Backflush avec embout mousse 25G / 0,5 mm,
aspiration active

Code couleur: ●

Box/5 | Stérile: Oui

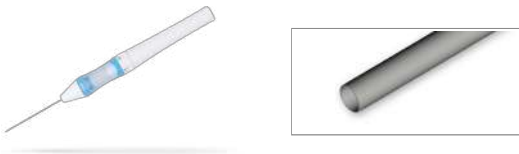


- Nouveau manche ergonomique pour un contrôle chirurgical optimal.
- Réservoir backflush de plus grande capacité.
- Aspiration globalement mieux contrôlée et plus précise des fluides intraoculaires.

1281.BTDH5

Backflush à usage unique pour œil fortement myope avec
embout brosse et aspiration active (25G / 0,5 mm)

Box/5 | Stérile: Oui

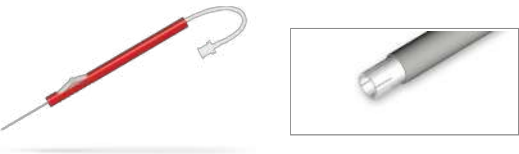

- Indications :
- Pour interventions sur des yeux fortement myopes.


- Caractéristiques et avantages :
- Disponible en 23G et 25G.

- Arguments de vente exclusifs
- Tige plus longue de cinq millimètres que celle d'une pince standard.

1281.SD05

Canule backflush Shiraga à usage unique avec embout en
brosse extensible et aspiration active 25G / 0,5 mm


Box/5 | Stérile: Oui

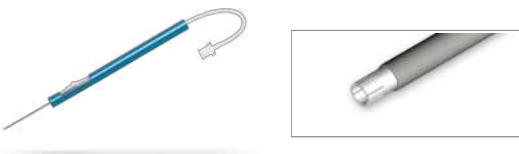

2281.STD05

Backflush instrument with 25ga/0.5 mm soft-tip cannula and
active aspiration

Code couleur: ● Box/5 | Stérile: Oui

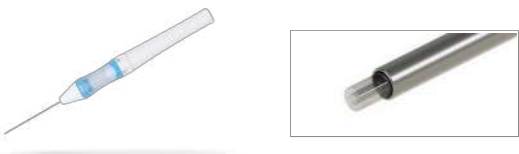


- Conception fine pour un déplacement et un contrôle plus aisés.
- Taille réduite de la poignée.
- Meilleur débit d'aspiration pour de hauts niveaux de vide, en particulier pour les plus faibles diamètres.
- Nécessite moins de force pour activer le réservoir.
- Réservoir de plus grande capacité.

2281.BTD05

Backflush avec embout brosse 25G / 0,5 mm, aspiration
active

Code couleur: ●

Box/5 | Stérile: Oui

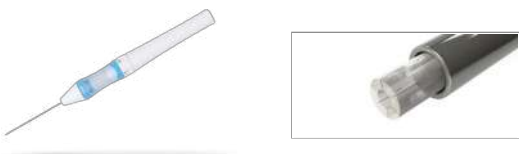

- Nouveau manche ergonomique pour un contrôle chirurgical optimal.
- Réservoir backflush de plus grande capacité.
- Aspiration globalement mieux contrôlée et plus précise des fluides intraoculaires.

ÉCLAIRAGE INTRAOCULAIRE

3269.B05 Sonde pour endo-illumination TotalView, 25G / 0,5 mm, avec
dépresseur scléral lumineux

Code couleur: ● Box/6 | Stérile: Oui



Sonde à fibre optique avec fibre de forme conique pour un champ d'illumination plus large.

3269.D05 Sonde pour endo-illumination, 25G / 0,5 mm, avec dépresseur
scléral lumineux

Code couleur: ● Box/6 | Stérile: Oui



3269.EB05 Chandelier grand champ pour système de trocars 25G / 0,5
mm.

Code couleur: ● Box/6 | Stérile: Oui



- Fibre optique TotalView avec fixation pour canule polyimide.
- Longueur de l'extrémité de la fibre optique réglable.

3269.SBS05 Sonde pour endo-illumination anti-reflet TotalView, 25G / 0,5
mm, avec dépresseur scléral lumineux

Code couleur: ● Box/6 | Stérile: Oui



SONDES LASER

SONDES LASER STANDARD, DROITES

7025.DORC Sonde laser, droite, avec connecteur DORC®, 25G / 0,5 mm

Box/6 | Stérile: Oui



(Non disponible aux Etats-Unis)

7025.ALC Sonde laser, droite, avec connecteur Alcon®, 25G / 0,5 mm


Box/6 | Stérile: Oui



SONDES LASER DIRECTIONNELLES

7225.DORC Sonde laser directionnelle, avec connecteur DORC®, 25G /
0,5 mm


Code couleur: ● Box/6 | Stérile: Oui

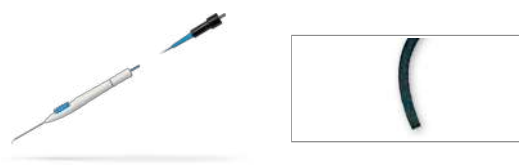

(Non disponible aux Etats-Unis)

7225.ALC Sonde laser directionnelle, avec connecteur Alcon®, 25G /
0,5 mm


Code couleur: ● Box/6 | Stérile: Oui

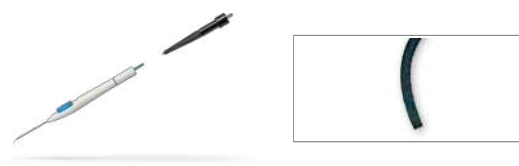

(Non disponible aux Etats-Unis)

7225.IRI Sonde laser directionnelle, avec connecteur Iridex®, 25G /
0,5 mm

Code couleur: ● Box/6 | Stérile: Oui

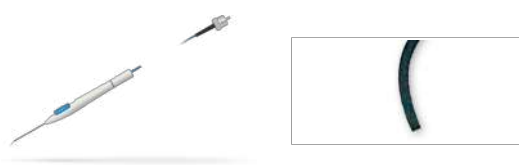


(Non disponible aux Etats-Unis)

SONDES LASER INCRÉMENTIELLES COURBES

7525.DORC Sonde laser 25G / 0,5 mm courbe effilée avec connecteur
DORC

Code couleur: ● Box/6 | Stérile: Oui

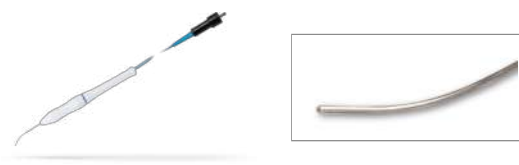

Indications :

- Embout courbe flexible pour accéder à la portion périphérique de la rétine.
- Convient pour la plupart des systèmes de canules 25G.

Caractéristiques et avantages :

- Embout conique de 0,5 mm à 0,35 mm

Arguments de vente exclusifs :

- Technologie de sonde économique.

7525.ALC Sonde laser 25G / 0,5 mm courbe effilée avec connecteur
Alcon

Code couleur: ● Box/6 | Stérile: Oui



Indications :

- Embout courbe flexible pour accéder à la portion périphérique de la rétine.
- Convient pour la plupart des systèmes de canules 25G.

Caractéristiques et avantages :

- Embout conique de 0,5 mm à 0,35 mm

Arguments de vente exclusifs :

- Technologie de sonde économique.

7525.IRI

Sonde laser 25G / 0,5 mm courbe effilée avec connecteur Iridex

Code couleur:

Box/6 | Stérile: Oui



- Indications :
- Embout courbe flexible pour accéder à la portion périphérique de la rétine.
 - Convient pour la plupart des systèmes de canules 25G.
- Caractéristiques et avantages :
- Embout conique de 0,5 mm à 0,35 mm
- Arguments de vente exclusifs :
- Technologie de sonde économique.

SONDES LASER INCRÉMENTIELLES LUMINEUSES

7625.DORC

Sonde Laser éclairante 25G/0.5mm avec Connecteur DORC

Code couleur:

Box/6 | Stérile: Oui



- Permet la chirurgie bi-manuelle en petite gauge
- Sonde laser multi-fonctions
- Sonde courbe, spécialement étudiée pour le laser en périphérie
- Sonde idéale pour un cerclage laser 360°
- Dessinée pour donner une parfaite visualisation de la zone durant le traitement

7625.ALC

Sonde Laser éclairante 25G/0.5mm avec Connecteur Alcon®

Code couleur:

Box/6 | Stérile: Oui



- Permet la chirurgie bi-manuelle en petite gauge
- Sonde laser multi-fonctions
- Sonde courbe, spécialement étudiée pour le laser en périphérie
- Sonde idéale pour un cerclage laser 360°
- Dessinée pour donner une parfaite visualisation de la zone durant le traitement

INSTRUMENTS A MEMBRANE

1292.ED05

Pic à membrane Eckardt à usage unique, 25G / 0,5 mm

Box/5 | Stérile: Oui




Pic à membrane formant un angle de 100° avec extrémité distale conique jusqu'à 0,3 mm pour une meilleure visualisation et une délamination précise des membranes.

CONSOMMABLES DIVERS

1272.SD25

Canule à pointe souple avec connecteur luer lock, 25G / 0,5 mm

Box/5 | Stérile: Oui

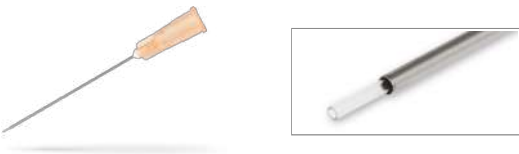

1272.VFI05

Canule VFI à embout polyimide de 7 mm à paroi mince(25G / 0.5 mm)


Box/5 | Stérile: Oui



1290.EXS25

« Sweeper » extensible recouvert de poussière de diamant extensible, 25G/0,5 mm

Code couleur: ● Box/5 | Stérile: Oui

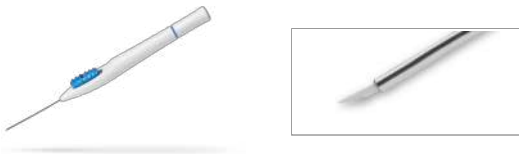


- Indications : «Balayage» des tissus pour ILM, PVR, rotation maculaire et autres manipulations des tissus.
- Caractéristiques et avantages : Conception d'embout extensible pour une insertion en douceur au travers d'une canule 25G avec valves de fermeture
- Arguments de vente exclusifs Manipulateur à extrémité en silicone recouvert de poussière de diamant

1290.DSS05

Sweeper recouvert de poussière de diamant, 25G / 0,5 mm

Box/5 | Stérile: Oui

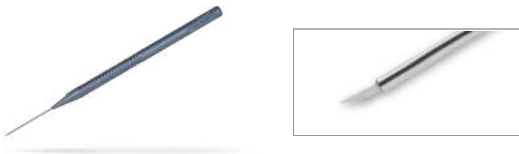

- Manipulateur à extrémité en silicone recouvert de poussière de diamant.
- «Balayage» des tissus pour ILM, PVR, rotation maculaire et autres manipulations des tissus.
- Non disponible aux Etats-Unis.

RÉUTILISABLES 25G

MICROFORCEPS/MICROCISEAUX

1286.E05

Microciseaux : verticaux, 25G / 0,5 mm

Code couleur: ● ● ● Box/1 | Stérile: Non



- Ciseaux verticaux à effet de coupe.
- Le bord inférieur de la lame des ciseaux est arrondi pour limiter l'engagement accidentel de la rétine.

1286.M05

Microciseaux : courbes horizontaux, 25G / 0,5 mm

Code couleur: ● ● ● Box/1 | Stérile: Non



- Ciseaux pointus avec courbure horizontale de 12 mm pour s'ajuster au contour de la rétine.
- Pour couper dans un plan parallèle à la rétine, couper des membranes qui adhèrent à la surface rétinienne et pour toute opération de coupe de membranes.

1286.W05

Micropince : Eckardt à griffes, 25G / 0,5 mm

Code couleur:   

Box/1 | Stérile: Non



- Micropince à griffes ; pour une saisie précise et une meilleure visualisation des membranes fines dans la région maculaire.
- La pince ILM la plus utilisée !
- Développé en collaboration avec le Prof. Dr Claus Eckardt.

2286.I05

Micropince : à griffe asymétrique, 25G / 0,5 mm

Code couleur:   

Box/1 | Stérile: Non



- La micropince asymétrique de Tano a une pointe décalée pour permettre une visualisation optimale sur toute la longueur de la pointe.
- Conception de la pointe convenant pour membrane limitante interne, fines membranes épirétiniennes et membranes diabétiques ou PVR.Excellent instrument multiusage.
- Les plates-formes intérieures à griffes sont légèrement rugueuses pour une prise solide.
- Extrémité et gaine antireflet pour une visualisation encore meilleure.

1286.ILM05

Micro-pince pour ILM, 25G / 0,5 mm

Code couleur:   

Box/1 | Stérile: Non



- Instrument à pointes fines pour une saisie et une élimination précises de la membrane et de la limitante interne.
- Une meilleure visualisation des fines membranes dans la région maculaire.

1286.C305

Micropince : Shah micro à mors striés, 25G / 0,5 mm

Code couleur:   

Box/1 | Stérile: Non



- Pince à pointe fine multifonction pouvant être utilisée pour saisir la membrane limitante interne.
- La plate-forme striée permet une prise maximale sur les tissus lorsque ceux-ci ont été surélevés.
- Très utile également pour les membranes immatures.

1286.WH05

Micropince d'Eckardt à plateau pour œil fortement myope (25G / 0,5 mm)

Code couleur:   

Box/1 | Stérile: Non



- Indications : Pour interventions sur des yeux fortement myopes.
- Caractéristiques et avantages : Disponible en 23G et 25G.
- Arguments de vente exclusifs Tige plus longue de cinq millimètres que celle d'une pince standard.

DIATHERMIE

1120.A	Câble de diathermie	1120.05	Manche d'endo-diathermie, droite, extrémité pointue, (25 gauge / 0.5mm)
	Box/1 Stérile: Non		Box/1 Stérile: Non
			
Câble de diathermie pour poignées 1120 / 1121 / 1122 / 1120-0.5 / 1120-D-0.5 et 1120-0.6			

USAGE UNIQUE 27G

SYSTÈME TRANSCONJONCTIVAL

1272.ED204	Système de canules un temps à usage unique (27G / 0,4 mm)
Code couleur: 	Box/5 Stérile: Oui



- Caractéristiques et avantages :
- Nouvelle lame RVM révolutionnaire Nécessite une pression d'insertion plus de 50% inférieure.
 - Arguments de vente exclusifs Valve de fermeture translucide exclusive nouvellement développée garantissant la visibilité lors de l'introduction des instruments.
 - Developed in corporation with Prof. Dr. Szurman

VITRECTOMES

STANDARD

2267.NMD04	High-Speed Vitrectome, 27 Gauge/0.4 mm, max. 2500 cuts/min.	6267.NMD04	Vitrectome haute vitesse / haut débit, 27G/0,4 mm, max. 6000 coupes/min
	Box/6 Stérile: Oui		Box/6 Stérile: Oui



8267.VIT27

Vitréotome grande vitesse 27G/8000 CPM à usage unique

Code couleur:

Box of 6 | Stérile: Oui



TDC

6268.NMD04

Vitréotome à usage unique à haute vitesse TDC 27G / 6000 CPM, gamme DORC Continuum

Code couleur:

Box/6 | Stérile: Oui



Indications :

- Elimination rapide et sûre du vitré

Caractéristiques et avantages :

- PLUS SÛR : La double vitesse de coupe diminue la traction sur les tissus environnants.
- PLUS RAPIDE : Le cycle de fonctionnement de 92% génère un débit d'aspiration constant indépendant de la vitesse de coupe.
- Débit d'aspiration ACCRU, jusqu'à trois fois supérieur au débit usuel.
- MEILLEUR : Réduction des turbulences liées aux variations de flux au niveau du port d'aspiration grâce à l'ouverture constante du port d'aspiration.

8268.VIT27

Vitréotome à usage unique à haute vitesse TDC 27G / 8000 CPM, gamme DORC Continuum

Code couleur:

Box/6 | Stérile: Oui



Indications :

- Elimination rapide et sûre du vitré

Caractéristiques et avantages :

- PLUS SÛR : La double vitesse de coupe diminue la traction sur les tissus environnants.
- PLUS RAPIDE : Le cycle de fonctionnement de 92% génère un débit d'aspiration constant indépendant de la vitesse de coupe.
- Débit d'aspiration ACCRU, jusqu'à trois fois supérieur au débit usuel.
- MEILLEUR : Réduction des turbulences liées aux variations de flux au niveau du port d'aspiration grâce à l'ouverture constante du port d'aspiration.

8310.27KS

27G Ultra Set de vitrectomie Ultra-court

Code couleur:

Box/1 kit | Stérile: Oui



Optimisé pour les petits yeux. 3 instruments inclus:

- Trocart 1 temps ultra-court 27G (inserteur et trocart 25% plus courts. Le trocart est conçu pour une meilleure retention;
- Fibre endo-illumination grand champ shielded ultra-courte 27G (20% plus courte);
- Vitréotome ultra-court TDC 27G (20% plus court, rigidité augmentée de 60%).

* En comparaison aux instruments 27G standards.

MICROFORCEPS/MICROCISEAUX

1286.WD04 Disposable Microforceps: Eckardt End-Gripping, 27 Gauge/0.4 mm

Code couleur: ● Box/5 | Stérile: Oui



- Microforceps with 'nail-like' end-gripping platforms; for precise grasping and improved visualization of thin membranes in the macular region.
- The most preferred ILM forceps !
- Developed with Prof. M.D. Claus Eckardt.

1286.WPD04 Micropince à usage unique Powergrip à griffes 27G / 0,4 mm

Code couleur: ● Box/5 | Stérile: Oui



2286.PD04 Microciseaux à usage unique : Bout crochet 27G / 0,4 mm

Code couleur: ● Box/5 | Stérile: Oui



1286.WRD04 Disposable Microforceps: Extended Reach – Wide Grip 27 gauge / 0.4 mm

Code couleur: ● Box/5 | Stérile: Oui




Caractéristiques et avantages par rapport à la pince 27G actuelle :

- largeur de préhension augmentée de 60%
- amélioration de 260% de la surface de préhension
- rigidité augmentée de 40%

2286.CD304 Disposable Microforceps Ultra peel 27 gauge / 0.4mm

Code couleur: ● Box/5 | Stérile: Oui

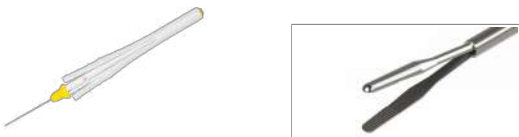


- Designed for single-movement peeling of thicker, more fibrotic membranes
- Delivers over 90% equivalent grasping area vs 23g design
- Blunt, rounded tip design and optimal shaft stiffness provides precise control for smaller gauge surgery

INSTRUMENTS À DÉBIT RÉTROGRADE


2281.AD04 Canule backflush avec aiguille mousse et aspiration active 27G / 0,4 mm.

Code couleur: ● Box/5 | Stérile: Oui

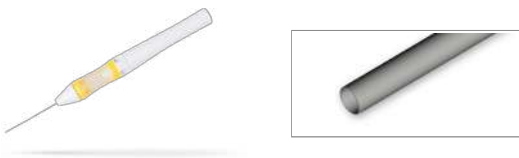


2281.BTD04 Backflush avec aiguille bout brosse 27G/0,4 mm et aspiration active

Code couleur: ● Box/5 | Stérile: Oui

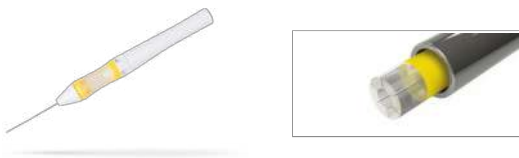

2281.STD04 Backflush instrument with 27ga/0.4 mm soft-tip cannula and active aspiration

Code couleur: ● Box/5 | Stérile: Oui

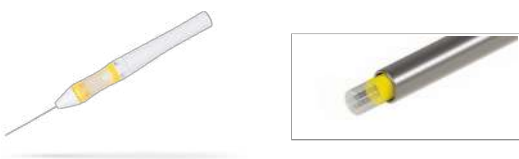

- Conception fine pour un déplacement et un contrôle plus aisés.
- Taille réduite de la poignée.
- Meilleur débit d'aspiration pour de hauts niveaux de vide, en particulier pour les plus faibles diamètres.
- Nécessite moins de force pour activer le réservoir.
- Réservoir de plus grande capacité.

ÉCLAIRAGE INTRAOCULAIRE

3269.MBD27 Chandelier Twinlight d' Eckardt 27G / 0,4 mm

Code couleur: ● Box/6 | Stérile: Oui



3269.PD27 Chandelier Twinlight d' Eckardt 27G avec connecteur Photon®

et aiguille de guidage
Box/6 | Stérile: Oui



3269.P27 Eclairage à fibre optique 27G (une fibre optique) avec connecteur Photon® et aiguille de guidage

Box/6 | Stérile: Oui



3269.BE27 Eclairage à fibre optique 27G et pièce à main pour fibre optique standard type d (gaine 23G) avec aiguille de guidage 27G

Code couleur: ● Box/6 | Stérile: Oui



3269.A27 Eclairage à fibre optique 27G (une fibre) avec aiguille de guidage

Code couleur: ● Box/6 | Stérile: Oui



3269.D04 Sonde pour endo-illumination, 27G / 0,4 mm, avec dépresseur scléral lumineux

Code couleur: ● Box of 6 | Stérile: Oui



Sonde pour endo-illumination, 27G / 0,4 mm

3269.B04 Sonde pour endo-illumination TotalView, 27G / 0,4 mm, avec dépresseur scléral lumineux


Code couleur: ● Box/6 | Stérile: Oui



Sonde à fibre optique avec fibre de forme conique pour un champ d'illumination plus large.

3269.SBS04 Sonde d'endo-illumination grand champ anti reflet avec dépresseur scléral lumineux (27G/0,4 mm)

Code couleur: ● Box of 6 | Stérile: Oui

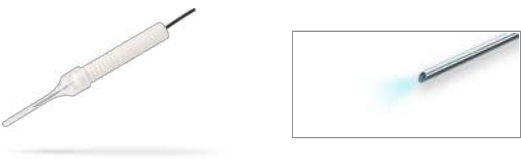


SONDES LASER

SONDES LASER INCRÉMENTIELLES COURBES


7527.IRI Sonde laser incrémentielle courbe, 27G, avec connecteur Iridex.

Box/6 | Stérile: Oui

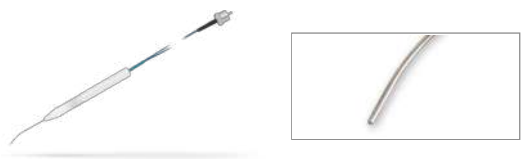


7527.DORC Sonde laser incrémentielle courbe, 27G/0,4 mm, avec connecteur DORC®

Box/6 | Stérile: Oui

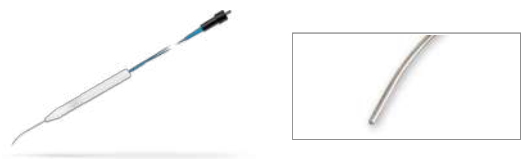

7527.ALC Sonde laser incrémentielle courbe, 27G, avec adaptateur Alcon®

Box/6 | Stérile: Oui

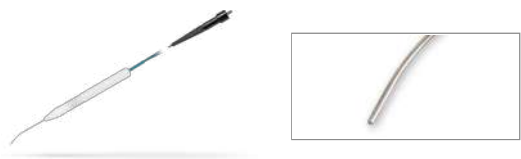

CONSOMMABLES DIVERS

1272.VFI04

Canule pour injection de silicone 27G/0,4 mm

Box/6 | Stérile: Oui



RÉUTILISABLES 27G

MICROFORCEPS/MICROCISEAUX

1286.W04

Micropince : Eckardt à griffes, 27 Gauge/0.4 mm

Code couleur: ● ● ●

Box/1 | Stérile: Non



- Micropince à griffes ; pour une saisie précise et une meilleure visualisation des membranes fines dans la région maculaire.
- La pince ILM la plus utilisée !
- Développé en collaboration avec le Prof. Dr Claus Eckardt.

INSTRUMENTS À MEMBRANE

1292.E04

Membrane Pic, 27 Gauge/0.4 mm

Code couleur: ● ●

| Stérile: Non



Membrane pic angled at 100° with a distal end that tapers to 0.3 mm. for improved visualization and precise membrane delamination.

DIATHERMIE

1120.A

Câble de diathermie

1120.04

Endo-diathermy handle, straight pointed tip 27 Gauge/0.4 mm

Box/1 | Stérile: Non

Box/1 | Stérile: Non



Câble de diathermie pour poignées 1120 / 1121 / 1122 / 1120-0.5 / 1120-D-0.5 et 1120-0.6

LIQUIDES POUR CHIRURGIE OPHTALMIQUE/TAMPONNADE

COLORANT POSTÉRIEUR

MEMBRANEBLUE-DUAL

MBD.05.S

MembraneBlue Dual

Box/5 | Stérile: Oui



- Seringue de 0,5 ml

ILM-BLUE

ILMB.05.S

ILM-Blue

Box/5 | Stérile: Oui



- Seringue de 0,5 ml

TAMPONNADE

HUILE DE SILICONE

Silicone Oil, 1.000 csts, 10ml syringe

Box/1 | Stérile: Oui



SIL-2000-S

Silicone Oil, 2.000 csts, 10ml syringe

Box/1 | Stérile: Oui



Silicone Oil, 5.000 csts, 10ml syringe

Box/1 | Stérile: Oui



PFCL

EFT-05-DEC

EFTIAR, perfluoro-décaline, flacon de 5 ml

Box/1 | Stérile: Oui



EFT-07-DEC

EFTIAR, perfluoro-décaline, flacon de 7 ml

Box/1 | Stérile: Oui



EFT-05-OCT

EFTIAR, perfluoro-octane, flacon de 5 ml

Box/1 | Stérile: Oui



EFT-07-OCT

EFTIAR, perfluoro-octane, flacon de 7 ml

Box/1 | Stérile: Oui



EFT-OCT5-S

EFTIAR Octane 5ml syringe

Box/1 | Stérile: Oui



EFT-OCT7-S

EFTIAR Octane 7ml syringe

Box/1 | Stérile: Oui



EFT-DEC5-S

EFTIAR Decalin 5ml syringe

Box/1 | Stérile: Oui



EFT-DEC7-S

EFTIAR Decalin 7ml syringe

Box/1 | Stérile: Oui



OCUGAS

GAS-SF6-S

OCUGAS SF6

Box/1 | Stérile: Oui



- Single use - 100% SF6 ready for mixing
- Non-pressurized gas container
- Exterior sterility for optimised ease of use
- Flexibility to create gas-air combination according to requirements of surgery

GAS-C2F6-S

OCUGAS C2F6

Box/1 | Stérile: Oui



- Single use - 100% gases for mixing
- Non-pressurized gas container
- Sterile primary container for optimized ease of use
- Flexibility to create gas-air combination according to requirements of surgery

GAS-C3F8-S

OCUGAS C3F8

Box/1 | Stérile: Oui



- Single use - 100% gases for mixing
- Non-pressurized gas container
- Sterile primary container for optimized ease of use
- Flexibility to create gas-air combination according to requirements of surgery

ACCESSOIRES

EFD.06

EFTIAR, canule à double orifice, 23G / 0,6 mm

Box/5 | Stérile: Oui



- Pour infusion de perfluorocarbones et aspiration de fluides intraoculaires simultanées.
- Le double orifice permet au chirurgien de maintenir une tension intraoculaire constante pendant l'injection.

1362.D

Kit VFE pour extraction de Silicone, seringue de 10 cc et
aiguille 20G à port latéral

Box/6 | Stérile: Oui



1362.VFE

Canule pour extraction de silicone à haut débit

Box/5 | Stérile: Oui




- Elimination sûre et rapide de l'huile de silicone de 1000 à 5000 cst
- Raccourcit d'un facteur 3 à 5 le temps nécessaire à l'élimination du silicone !

1365

Connecteur VFI DORC® entre système DORC® et 1363-DD


Box/1 | Stérile: Non

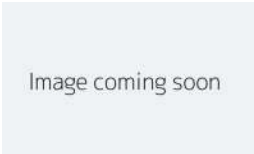

1369

Connecteur VFI Ruck® entre système Ruck® et 1363-DD

Box/1 | Stérile: Non

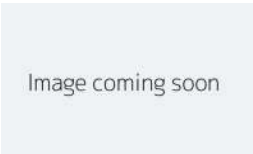

1272.HSE06

Canule pour extraction d'huile de silicone de haute viscosité,
236

Box/6 | Stérile: Oui



- Spécialement adaptée pour l'élimination de l'huile de silicone de haute viscosité.
- Canule plus longue pour faciliter l'élimination des fluides de haute densité

EFD.100

EFTIAR, canule à double orifice, 20G / 0,9 mm

Box/5 | Stérile: Oui



- Pour infusion de perfluorocarbène et aspiration de fluides intraoculaires simultanées.
- Le double orifice permet au chirurgien de maintenir une tension intraoculaire constante pendant l'injection.

APPAREILS CHIRURGICAUX

LEDSTAR

1266.LED

LEDStar

Box/1 | Stérile: Non



- Eclairage en toute sécurité: Longueurs d'onde UV et IR non toxiques
- Eclairage puissant: Jusqu'à 40 lumens 3 sorties pour fibre indépendantes à intensité réglable Compatible avec les fibres optiques et chandeliers 20G - 27G
- Contrôle de la couleur de l'éclairage: La lumière blanche la plus blanche Contrôlable du blanc au jaune
- Economique: Longévité de l'ampoule jusqu'à 10.000 heures de travail

ULTRA SPEED TRANSFORMER

1265.UST

Ultra Speed Transformer

Box/1 | Stérile: Non




- Transformateur ultrarapide pour convertir un système de vitrectomie standard en un système de vitrectomie à haute vitesse 6.000 coupes/min.

1265.USTA5

Adaptateur pour transformateur Ultra Speed de type 5, pour systèmes DORC


Box/1 | Stérile: Non

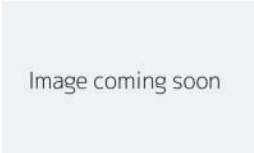

1265.USTA4

Adaptateur pour transformateur Ultra Speed de type 4, pour systèmes Ruck


Box/1 | Stérile: Non

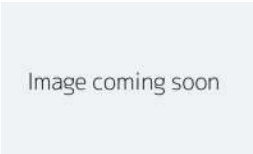

1265.USTA3

Adaptateur pour transformateur Ultra Speed de type 1, pour systèmes Geuder & Oertli


Box/1 | Stérile: Non

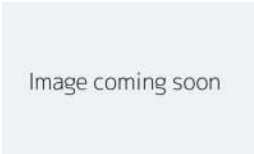

1265.USTA2

Adaptateur pour transformateur Ultra Speed de type 2, pour systèmes Alcon et Bausch+Lomb «Schröder Bellows»


Box/1 | Stérile: Non

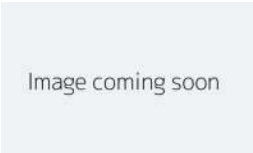

1265.USTA1

Adaptateur pour transformateur Ultra Speed de type 1, pour systèmes B+L «Snap-Tite»

Box/1 | Stérile: Non

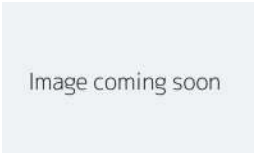

ASSOCIATE

1250.VGPC **Système global de contrôle de la pression avec piège à bulles**
pour utilisation avec la cassette Associate.

Box/6 | Stérile: Oui



- Perfusion contrôlée par pompe à air pour une pression intraoculaire constante.
- Convient pour usage antérieur et postérieur.

6279.ASC **Cassette Associate avec ligne de perfusion / piège à bulles**
perfectionnés. Convient pour le contrôle global de la pression
antérieure et postérieure

Box/5 | Stérile: Oui



CRYOSTAR ACCESSOIRES

1540.D **Sonde Cryo : rétinienne longue, 2,5 mm**

Box/6 | Stérile: Oui



- Compatible with DORC CryoStar (REF: 1500.III)
- Extended reach retinal probe
- Convenience of single-use probe
- Avoids requirement for re-sterilization after use
- Available in box of 6 probes

ADAPTATEURS

3269.ALC1 **Adaptateur à fibre optique Constellation® permettant**
l'utilisation de fibres optiques D.O.R.C.® avec le système
Constellation®.

Box/1 | Stérile: Non



LENTILLE POUR VITRECTOMIE À USAGE UNIQUE

1284.DD

Lentille pour vitrectomie à usage unique : plane

Box/5 | Stérile: Oui



Facilite la visualisation du fundus central.

1284.ED

Lentille pour vitrectomie à usage unique : biconcave

Box/5 | Stérile: Oui



Pour échange air-fluides.

1284.FD

Lentille pour vitrectomie à usage unique : grossissante

Box/5 | Stérile: Oui



Facilite la visualisation du vitré central et du fundus.

1284.GD

Lentille pour vitrectomie à usage unique : à large champ

Box/5 | Stérile: Oui



Facilite la visualisation du fundus central postérieur et du vitré.

1284.ID

Lentille pour vitrectomie à usage unique : prisme à 30°

Box/5 | Stérile: Oui



Facilite la visualisation de la périphérie au-delà de l'équateur.

KÉRATOPROTHÈSE TEMPORAIRE ECKARDT

1285.1

Kératoprothèse temporaire Eckardt, Ø; 7 mm, profondeur
2,8 mm

Box/1 | Stérile: Non



Pour yeux aphakes. Pour utilisation temporaire dans des yeux présentant des opacités cornéennes lors de chirurgie rétinienne.

1285.2

Kératoprothèse temporaire Eckardt, Ø; 7 mm, profondeur
1,6 mm

Box/1 | Stérile: Non



Pour yeux phakes. Pour utilisation temporaire dans des yeux présentant des opacités cornéennes lors de chirurgie rétinienne.

1285.5

Kératoprothèse temporaire Eckardt, Ø; 8 mm, profondeur

2,5 mm

Box/1 | Stérile: Non



Pour yeux aphakes. Pour utilisation temporaire dans des yeux présentant des opacités cornéennes lors de chirurgie rétinienne.

PRODUITS POUR CERCLAGE SCLÉRAL

92-01

Bande de cerclage 2,0 mm, type 40 / S-2969

Box/5 | Stérile: Oui



92-02

Bande de cerclage 2,5 mm, type 240 / S-2987

Box/5 | Stérile: Oui



92-09

Bande en silicone 3,5 mm, type 41 / S-2970

Box/5 | Stérile: Oui



92-10

Bande en silicone 4,0 mm, type 42 / S-2971


Box/5 | Stérile: Oui



92-14

Manchon en silicone, type 270 / S-3019


Box/5 | Stérile: Oui

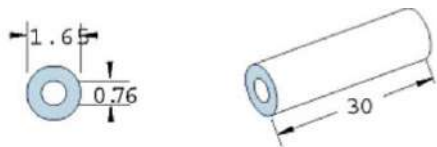

92-13

Manchon en silicone, type 70 / S-3018


Box/5 | Stérile: Oui

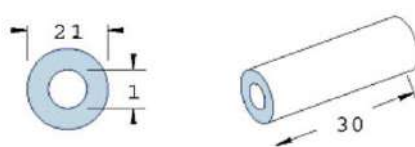

92-15

Roue concave en silicone, type 277 / S-2986


Box/5 | Stérile: Oui

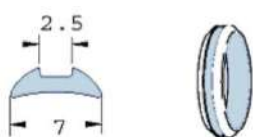

92-16

Roue concave en silicone, type 279 / S-2991


Box/5 | Stérile: Oui

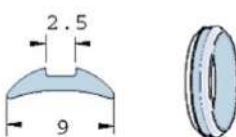

92-17

Roue convexe en silicone, type 287 / S-3014


Box/5 | Stérile: Oui

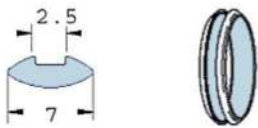

92-18

Roue asymétrique en silicone, type 276 / S-2999


Box/5 | Stérile: Oui

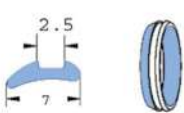

92-22

Roue convexe en silicone, type 286 / S-3010


Box/5 | Stérile: Oui

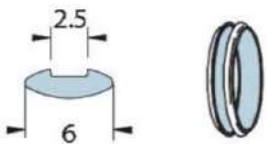

92-27

Produits pour cerclage scléral : Type 112, implant méridional –
12,0 mm


Box/5 | Stérile: Oui

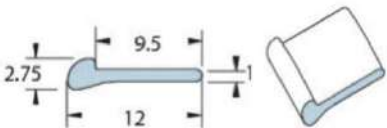

92-50-3R

Eponge ronde 3,0 mm, type 503 / S-1982-3


Box/5 | Stérile: Oui

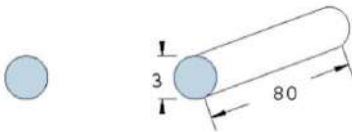

92-50-4R

Eponge ronde 4,0 mm, type 504 / S-1982-4


Box/5 | Stérile: Oui

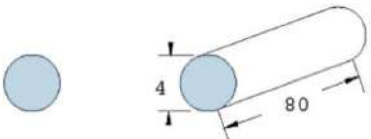

92-50-5R

Eponge ronde 5,0 mm, type 505 / S-1982-5


Box/5 | Stérile: Oui

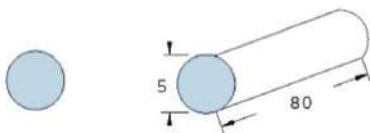

92-50-5

Eponge ovale 3,0 mm x 5,0 mm, type 506 / S-1981-5


Box/5 | Stérile: Oui

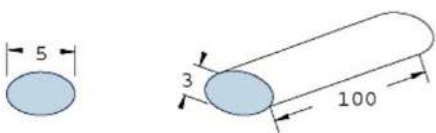

92-50-7.5

Eponge ovale 5,5 mm x 7,5 mm, type 507 / S-1981-7.5

Box/5 | Stérile: Oui

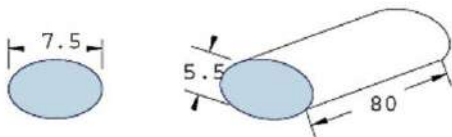

INSTRUMENTS

USAGE UNIQUE

AIGUILLE DE PHACOÉMULSIFICATION

8400.18F01 Aiguille de phacoémulsification évasée trois crans pour incision
MICS de 1,8 mm (à usage unique)

Box of 6 | Stérile: Oui



- Chaque kit comprend :
- 1 aiguille évasée trois crans pour incision de 1,8 mm
 - 2 manchons d'irrigation pour aiguille de phacoémulsification 1,8 mm, modèle 3008.IR18
 - 1 chambre de test pour pièce à main de phacoémulsification, modèle 3007
 - 1 clef de serrage

8400.18A01 Aiguille de phacoémulsification évasée angulée trois crans pour
incision MICS de 1,8 mm (à usage unique).

Box of 6 | Stérile: Oui



- Chaque kit comprend :
- 1 aiguille évasée angulée trois crans pour incision de 1,8 mm
 - 2 manchons d'irrigation pour aiguille de phacoémulsification 1,8 mm, modèle 3008.IR18
 - 1 chambre de test pour pièce à main de phacoémulsification, modèle 3007
 - 1 clef de serrage

8400.22F01 Aiguille de phacoémulsification évasée trois crans pour incision
de 2,2 mm (à usage unique)

Box of 6 | Stérile: Oui



- Chaque kit comprend :
- 1 aiguille évasée trois crans pour incision de 2,2 mm
 - 2 manchons d'irrigation pour aiguille de phacoémulsification 2,2 mm, modèle 3008.IR22
 - 1 chambre de test pour pièce à main de phacoémulsification, modèle 3007
 - 1 clef de serrage

8400.22A01 Aiguille de phacoémulsification évasée angulée trois crans pour
incision de 2,2 mm (à usage unique)

Box of 6 | Stérile: Oui



- Chaque kit comprend :
- 1 aiguille évasée angulée trois crans pour incision de 2,2 mm
 - 2 manchons d'irrigation pour aiguille de phacoémulsification 2,2 mm, modèle 3008.IR22
 - 1 chambre de test pour pièce à main de phacoémulsification, modèle 3007
 - 1 clef de serrage

8400.22S01 Aiguille de phacoémulsification droite pour incision de 2,2 mm
(à usage unique)

Box of 6 | Stérile: Oui



- Chaque kit comprend :
- 1 aiguille droite pour incision de 2,2 mm
 - 2 manchons d'irrigation pour aiguille de phacoémulsification 2,2 mm, modèle 3008.IR22
 - 1 chambre de test pour pièce à main de phacoémulsification, modèle 3007
 - 1 clef de serrage

8400.25F01 Aiguille de phacoémulsification évasée trois crans pour incision
de 2,5 mm (à usage unique)

Box of 6 | Stérile: Oui



- Chaque kit comprend :
- 1 aiguille évasée trois crans pour incision de 2,5 mm
 - 2 manchons d'irrigation pour aiguille de phacoémulsification 2,5 mm, modèle 3008.IR25
 - 1 chambre de test pour pièce à main de phacoémulsification, modèle 3007
 - 1 clef de serrage

8400.25A01 **Aiguille de phacoémulsification évasée angulée trois crans pour incision de 2,5 mm (à usage unique)**

Box of 6 | Stérile: Oui



Chaque kit comprend :

- 1 aiguille évasée angulée trois crans pour incision de 2,5 mm
- 2 manchons d'irrigation pour aiguille de phacoémulsification 2,5 mm, modèle 3008.IR25
- 1 chambre de test pour pièce à main de phacoémulsification, modèle 3007
- 1 clef de serrage

8400.25S01 **Aiguille de phacoémulsification droite pour incision de 2,5 mm (à usage unique)**

Box of 6 | Stérile: Oui



Chaque kit comprend :

- 1 aiguille droite pour incision de 2,5 mm
- 2 manchons d'irrigation pour aiguille de phacoémulsification 2,5 mm, modèle 3008.IR25
- 1 chambre de test pour pièce à main de phacoémulsification, modèle 3007
- 1 clef de serrage

8400.28F01 **Aiguille de phacoémulsification évasée trois crans pour incision de 2,8 mm (à usage unique)**

Box of 6 | Stérile: Oui



Chaque kit comprend :

- 1 aiguille évasée trois crans pour incision de 2,8 mm
- 2 manchons d'irrigation pour aiguille de phacoémulsification 2,5 mm, modèle 3008.IR28
- 1 chambre de test pour pièce à main de phacoémulsification, modèle 3007
- 1 clef de serrage

8400.28A01 **Aiguille de phacoémulsification évasée angulée trois crans pour incision de 2,8 mm (à usage unique)**

Box of 6 | Stérile: Oui



Chaque kit comprend :

- 1 aiguille évasée angulée trois crans pour incision de 2,8 mm
- 2 manchons d'irrigation pour aiguille de phacoémulsification 2,8 mm, modèle 3008.IR28
- 1 chambre de test pour pièce à main de phacoémulsification, modèle 3007
- 1 clef de serrage

8430.18SF1 **MICS 1.8 mm 1.8 mm set phaco à usage unique avec aiguille droite évasée à 30°**

Box/6 | Stérile: Oui



8445.18SF1 **MICS 1.8 mm set phaco à usage unique avec aiguille droite évasée à 45°**

Box/6 | Stérile: Oui



8430.22SF1 **2.2 mm set phaco à usage unique avec aiguille droite évasée à 30°**

Box/6 | Stérile: Oui



8445.22SF1 **2.2 mm set phaco à usage unique avec aiguille droite évasée à 45°**

Box/6 | Stérile: Oui



8430.24SF1

2.4 mm set phaco à usage unique avec aiguille droite évasée à 30°

Box/6 | Stérile: Oui



8445.24SF1

2.4 mm set phaco à usage unique avec aiguille droite évasée à 45°

Box/6 | Stérile: Oui



8430.28SF1

2.8 mm set phaco à usage unique avec aiguille droite évasée à 30°

Box/6 | Stérile: Oui



8445.28SF1

2.8 mm set phaco à usage unique avec aiguille droite évasée à 45°

Box/6 | Stérile: Oui



COUTEAUX À CATARACTE

COUTEAUX À FENTE À BISEAU SUPÉRIEUR - ANGULAIRES

53.3722

Couteau phaco, 2,2 mm, angulé, biseau supérieur

Box/6 | Stérile: Oui



53.3727

Couteau phaco, 2,7 mm, angulé, biseau supérieur

Box/6 | Stérile: Oui



COUTEAUX À FENTE À DOUBLE BISEAU - ANGULAIRES

51.3727

Couteau phaco, 2,75 mm, angulé à 45°, double biseau

Box/6 | Stérile: Oui



51.3722

Couteau phaco, 2,2 mm, angulé à 45°, double biseau

Box/6 | Stérile: Oui



COUTEAUX DE TYPE POIGNARD

51.4891

Couteau droit, 15°

Box/6 | Stérile: Oui



COUTEAU EN CROISSANT

51.1118

Couteau croissant, 2,25mm, 55°, biseau supérieur

Box/6 | Stérile: Oui




COUTEAUX CORNÉENS TRANSPARENTS

54.5725

Couteau "Clear Corneal", 2,5 mm, angulé

Box/6 | Stérile: Oui

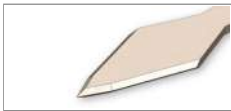

LAMES MVR

1282.D06

Lame MVR, courbée à 45°, 23G / 0,6 mm

Box/6 | Stérile: Oui



51.5230

Lame MVR 20G, droite

Box/6 | Stérile: Oui



52.5220

Lame MVR 20G, angulée

Box/6 | Stérile: Oui




CANULES

CANULES RÉTROBULBAIRES POUR ANESTHÉSIE

52.1637

Canule anesthésique rétrobulbaire - Atkinson (25G x 1 1/2 po / 0,5 x 38 mm)

Box/10 | Stérile: Oui

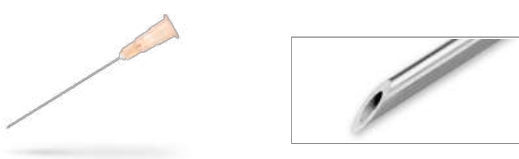


CANULE SOUS-TÉNONNIENNE POUR ANESTHÉSIE

52.5176

Canule anesthésique sous-ténonnienne courbe à extrémité aplatie (19G x 1 po / 1,1 x 25 mm)

Box/10 | Stérile: Oui

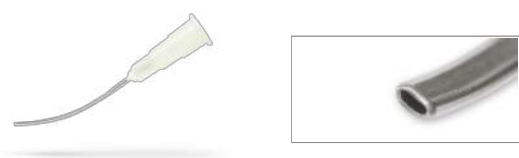


CANULES POUR CHAMBRE ANTÉRIEURE

52.1273

Canule pour chambre antérieure - Rycroft (30G x 7/8 po / 0,3 x 22 mm)


Box/10 | Stérile: Oui

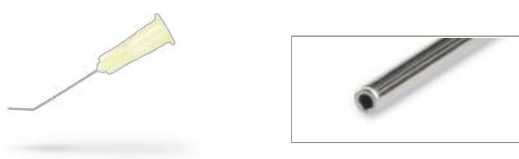

52.1281

Canule pour chambre antérieure - Rycroft (21G x 7/8 po / 0,81 x 22 mm)

Box/10 | Stérile: Oui

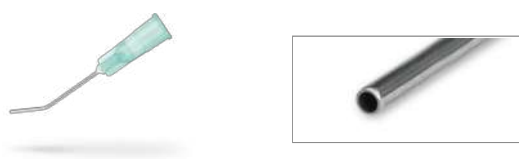


PRÉSERVATEUR DE CHAMBRE ANTÉRIEURE

52.5061

Dispositif de maintien de chambre antérieure autofixant
(Lewicky) (20G x 9/64 po / 0,9 x 3,5 mm)

Box/5 | Stérile: Oui

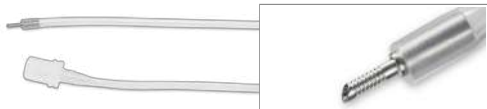

CANULES POUR HYDRODISSECTION

52.5099

Hydrodissecteur de noyau Sauter (27G x 7/8 po / 0,4 x 22 mm)

Box/10 | Stérile: Oui



52.5155

Hydrodissecteur de noyau Helsinki (27G x 7/8 po / 0,4 x 22 mm)

Box/10 | Stérile: Oui



CANULE POUR IRRIGATION / ASPIRATION

52.5047

Canule I/A Simcoe, modèle court 0,3 mm, port 200 mm,
tuyaux en silicone (23/23G / 0,64 x 0,64 mm)

Box/5 | Stérile: Oui



Modèle court, port de 0,3 mm Tuyaux en silicone de 200 mm

ACCESSOIRES

4020

Rétracteurs d'iris

Box/5 | Stérile: Oui



- Rétracteur souple permettant une dilatation efficace de l'iris.
- En polypropylène avec bouchon en silicone pour un étirement mécanique en douceur de l'iris.
- Emballage exclusif, accès aisé et contrôlé à chaque rétracteur séparément.

RÉUTILISABLES

INSTRUMENTS POUR CAPSULORHEXIS

50.265

Pince capsulorhexis de Mohr

Box/1 | Stérile: Non



- Micro-pointe adapté aux procédures de phacoémulsification 1,8 mm
- Instrument combiné pour démarer le rhexis
- Prise aisée et parfaite saisie du volet
- Conception et ergonomie similaires à celles d'une pince pour capsulorhexis classique
- Longueur de la tige : 13 mm (ancienne version : 24 mm)

PHACO

ACCESSOIRES D'IRRIGATION/ASPIRATION

1270.B

Kit d'irrigation/aspiration bimanuel, 20G / 0,9 mm

Set/2 | Stérile: Non



1273.EH

Pièce à main I/A universelle, sans embouts

Box/1 | Stérile: Non



1273.EPA

Embout courbe avec manchon de silicone pour pièce à main
I/A 1273-EH

Box/1 | Stérile: Non



1273.ES

Embout droit pour pièce à main I/A 1273-EH

Box/1 | Stérile: Non



MINI-PIÈCE À MAIN DE PHACOÉMULSIFICATION

3002.P

Pièce à main de phacoémulsification Sure Touch

Box/1 | Stérile: Non



3002

Pièce à main de phacoémulsification

Box/1 | Stérile: Non



- Forme compacte plus facile à tenir en main pour les chirurgiens qui préfèrent une pièce à main de plus petite taille.
- Pièce à main plus légère – plus confortable à tenir en main au cours de l'intervention.
- Poignée ergonomique rainurée pour des gestes sûrs durant l'intervention.
- Compatible avec la gamme actuelle d'accessoires pour phacoémulsification DORC.

3002.M

Pièce à main de microphacoémulsification/fragmentation ultra-
légère

Box/1 | Stérile: Non



AIGUILLE DE PHACOÉMULSIFICATION: 1.8 MM

3005.F18 Aiguille de phacoémulsification évasée trois crans pour incision
MICS de 1,8 mm (à réutilisation limitée, 20x)

Box of 6 | Stérile: Non



Chaque kit comprend :

- 1 aiguille évasée trois crans pour incision de 1,8 mm
- 1 manchon d'irrigation pour aiguille de phacoémulsification 1,8 mm, modèle 3008.IR18
- 1 adaptateur de nettoyage pour aiguille de phacoémulsification, modèle 3008.N
- 1 adaptateur de nettoyage pour manchon de phacoémulsification, modèle 3008.S
- 1 chambre de test pour pièce à main de phacoémulsification, modèle 3007

3430.18SF1 MICS 1.8 mm set phaco réutilisable avec aiguille droite évasée
à 30°

Box/6 | Stérile: Non



3445.18SF1 MICS 1.8 mm set phaco réutilisable avec aiguille droite évasée
à 45°

Box/6 | Stérile: Non



AIGUILLE DE PHACOÉMULSIFICATION: 2.2 MM

3005.S22 Aiguille de phacoémulsification droite pour incision de 2,2 mm
(à réutilisation limitée, 20x)

Box of 6 | Stérile: Non



Chaque kit comprend :

- 1 aiguille droite pour incision de 2,2 mm
- 1 manchon d'irrigation pour aiguille de phacoémulsification 2,2 mm, modèle 3008.IR22
- 1 adaptateur de nettoyage pour aiguille de phacoémulsification, modèle 3008.N
- 1 adaptateur de nettoyage pour manchon de phacoémulsification, modèle 3008.S
- 1 chambre de test pour pièce à main de phacoémulsification, modèle 3007

3005.F22 Aiguille de phacoémulsification évasée trois crans pour incision
de 2,2 mm (à réutilisation limitée, 20x)

Box of 6 | Stérile: Non



Chaque kit comprend :

- 1 aiguille évasée trois crans pour incision de 2,2 mm
- 1 manchon d'irrigation pour aiguille de phacoémulsification 2,2 mm, modèle 3008.IR22
- 1 adaptateur de nettoyage pour aiguille de phacoémulsification, modèle 3008.N
- 1 adaptateur de nettoyage pour manchon de phacoémulsification, modèle 3008.S
- 1 chambre de test pour pièce à main de phacoémulsification, modèle 3007

3005.AF22

Aiguille de phacoémulsification évasée angulée trois crans pour
incision de 2,2 mm (à réutilisation limitée, 20x)

Box of 6 | Stérile: Non



- Chaque kit comprend :
- 1 aiguille évasée angulée en trois crans pour incision de 2,2 mm
 - 1 manchon d'irrigation pour aiguille de phacoémulsification 2,2 mm, modèle 3008.IR22
 - 1 adaptateur de nettoyage pour aiguille de phacoémulsification, modèle 3008.N
 - 1 adaptateur de nettoyage pour manchon de phacoémulsification, modèle 3008.S
 - 1 chambre de test pour pièce à main de phacoémulsification, modèle 3007

3430.22SF1

2.2 mm set phaco réutilisable avec aiguille droite évasée à
30°

Box/6 | Stérile: Non



3445.22SF1

2.2 mm set phaco réutilisable avec aiguille droite évasée à
45°

Box/6 | Stérile: Non



AIGUILLE DE PHACOÉMULSIFICATION: 2.4 MM

3430.24SF1

2.4 mm set phaco réutilisable avec aiguille droite évasée à
30°

Box/6 | Stérile: Non



3445.24SF1

2.4 mm set phaco réutilisable avec aiguille droite évasée à
45°

Box/6 | Stérile: Non



AIGUILLE DE PHACOÉMULSIFICATION: 2.5 MM

3005.F25
Aiguille de phacoémulsification évasée trois crans pour incision de 2,5 mm (à réutilisation limitée, 20x)

Box of 6 | Stérile: Non



- Chaque kit comprend :
- 1 aiguille évasée trois crans pour incision de 2,5 mm
 - 1 manchon d'irrigation pour aiguille de phacoémulsification 2,5 mm, modèle 3008.IR25
 - 1 adaptateur de nettoyage pour aiguille de phacoémulsification, modèle 3008.N
 - 1 adaptateur de nettoyage pour manchon de phacoémulsification, modèle 3008.S
 - 1 chambre de test pour pièce à main de phacoémulsification, modèle 3007

3005.AF25
Aiguille de phacoémulsification évasée angulée trois crans pour incision de 2,5 mm (à réutilisation limitée, 20x)

Box of 6 | Stérile: Non



- Chaque kit comprend :
- 1 aiguille évasée angulée trois crans pour incision de 2,5 mm
 - 1 manchon d'irrigation pour aiguille de phacoémulsification 2,5 mm, modèle 3008.IR25
 - 1 adaptateur de nettoyage pour aiguille de phacoémulsification, modèle 3008.N
 - 1 adaptateur de nettoyage pour manchon de phacoémulsification, modèle 3008.S
 - 1 chambre de test pour pièce à main de phacoémulsification, modèle 3007

AIGUILLE DE PHACOÉMULSIFICATION: 2.8 MM

3005.F28
Aiguille de phacoémulsification évasée trois crans pour incision de 2,8 mm (à réutilisation limitée, 20x)

Box of 6 | Stérile: Non



- Chaque kit comprend :
- 1 aiguille évasée trois crans pour incision de 2,8 mm
 - 1 manchon d'irrigation pour aiguille de phacoémulsification 2,8 mm, modèle 3008.IR28
 - 1 adaptateur de nettoyage pour aiguille de phacoémulsification, modèle 3008.N
 - 1 adaptateur de nettoyage pour manchon de phacoémulsification, modèle 3008.S
 - 1 chambre de test pour pièce à main de phacoémulsification, modèle 3007

3005.AF28
Aiguille de phacoémulsification évasée angulée trois crans pour incision de 2,8 mm (à réutilisation limitée, 20x)

Box of 6 | Stérile: Non



- Chaque kit comprend :
- 1 aiguille évasée angulée trois crans pour incision de 2,8 mm
 - 1 manchon d'irrigation pour aiguille de phacoémulsification 2,8 mm, modèle 3008.IR28
 - 1 adaptateur de nettoyage pour aiguille de phacoémulsification, modèle 3008.N
 - 1 adaptateur de nettoyage pour manchon de phacoémulsification, modèle 3008.S
 - 1 chambre de test pour pièce à main de phacoémulsification, modèle 3007

3430.28SF1
2.8 mm set phaco réutilisable avec aiguille droite évasée à 30°

Box/6 | Stérile: Non



3445.28SF1
2.8 mm set phaco réutilisable avec aiguille droite évasée à 45°

Box/6 | Stérile: Non



MINI-PIÈCE À MAIN DE PHACOÉMULSIFICATION

3005.F106 Aiguilles de phacofragmentation, 23G / 0,6 mm, avec clef de serrage

Box/3 | Stérile: Non



- Phacofragmentation pour utilisation avec des systèmes 23G.
- Nouvelle application pour phacofragmentation trans-conjonctivale 23G.
- Développé en collaboration avec le Prof. Ehab El-Rayes, Institut National d'Ophthalmologie, Egypte.

ACCESSOIRES

3008.IR18 Manchon d'irrigation pour aiguille de phacoémulsification 1,8 mm

Box of 6 | Stérile: Non



3007 Chambre de test pour pièce à main de phacoémulsification

Box/1 | Stérile: Non



3008.IR22 Manchon d'irrigation pour aiguille de phacoémulsification 2,2 mm

Box of 6 | Stérile: Non



3008.IR25 Manchon d'irrigation pour aiguille de phacoémulsification 2,5 mm

Box of 6 | Stérile: Non



3008.IR28 Manchon d'irrigation pour aiguille de phacoémulsification 2,8 mm

Box of 6 | Stérile: Non



3008.K Clé métallique universelle pour aiguille de phacoémulsification Star

Box of 1 | Stérile: Non



3008.N

Adaptateur de nettoyage pour aiguille de phacoémulsification

Box of 3 | Stérile: Non



3008.S

Adaptateur de nettoyage pour manchon de phacoémulsification

Box of 3 | Stérile: Non



INSTRUMENTS CORNÉENS

DSEK/DSAEK/DMEK

2110

Kit de spatules pour dissection D.A.L.K.

Box/1 | Stérile: Non



Pour kératoplastie lamellaire antérieure profonde, le kit de spatules pour dissection D.A.L.K. comprend trois types de spatules : Spatule rouge : spatule courte triangulaire s'utilisant pour la dissection en direction inférieure dans la cornée jusqu'à la profondeur stromale souhaitée.Spatule blanche : spatule courte de demi longueur à extrémité arrondie pour la dissection au travers de la cornée jusqu'aux deux tiers.Spatule bleue : spatule courte de longueur complète s'utilisant pour terminer la dissection au travers de la cornée jusqu'à 360 degrés.

50.2118

Racloir P.L.K., type I

Box/1 | Stérile: Non



Racloir à extrémité à 45° semi-pointue, arrondie pour l'arrachage in vivo de la membrane de Descemet de la cornée receveuse, de 6 heures au milieu de la cornée.

50.2119

Racloir P.L.K., type II

Box/1 | Stérile: Non



Racloir à extrémité à 90° semi-pointue, arrondie pour l'arrachage in vivo de la membrane de Descemet de la cornée receveuse, du milieu de la cornée à 12 heures.

50.2201

Crochet Sinskey pour DMEK vers le haut

Box/1 | Stérile: Non



50.2202

Crochet Sinskey pour DMEK vers le bas

Box/1 | Stérile: Non



50.2203

Pince pour manipulation de greffon de DMEK à pointes extra-fines pour déroulement intra- ou extra-oculaire du greffon

Box/1 | Stérile: Non



50.2200

Kit chirurgical à usage unique pour DMEK

Box/3 | Stérile: Oui



- Pipette courbe pour chargement du greffon et insertion dans la chambre antérieure
- Double raccord luer-lock
- Pipette en verre droite avec ballon pour rinçage du greffon
- Seringue de 5 ml avec raccord luer-lock (x 2)
 - 1 pour l'insertion du greffon
 - 1 pour le BSS
- Seringue de 1 ml (injection d'air)
- Couteau "MVR" (droit)
- Canule mousse 27G (BSS)
- Canule courbe 30G pour injection d'air

LIQUIDES POUR CHIRURGIE OPHTALMIQUE

VISIONBLUE

VBL-10-S

VisionBlue, seringue de 0,5 ml

Box/10 | Stérile: Oui



Capsule staining to visualize the capsulorhexis in cataract surgery

- Excellent visualization of the capsulorhexis in eyes with mature cataract or small pupils
- Clear outline of the capsulorhexis rim during the entire surgery
- Reduced risk of complications due to an incomplete capsulorhexis
- Visualization of the leading edge of a "lost" capsulorhexis

D.O.R.C. Dutch Ophthalmic Research Center (International) B.V.

Country: Netherlands
Visiting address: Kerkweg 47e, 3214 VC
Zuidland, The Netherlands
Postal address: P.O. Box 43, 3214 ZG
Zuidland, The Netherlands
Telephone number: +31 181 458080
Fax number: +31 181 458090

Dutch Ophthalmic Research Center International Shanghai Representative Office

Country: China
Visiting address: F29, Shanghai Kerry Centre No.
1515 West Nanjing Road Shanghai, 200040 China
Telephone number: 0086 (21) 6103 7339
Fax number: 0086 (21) 6103 7340

D.O.R.C. France S.A.R.L.

Country: France
Visiting address: 27 Rue Louis Vicat, 75015
Paris
Telephone number: +33 1 73 07 17 46
Fax number: +33 1 73 07 17 48

D.O.R.C. España, S. L.

Country: Spain
Visiting address: Avda. Diagonal 640, 6ª planta,
08017 Barcelona
Telephone number: 0034 900 649 006 / 0034
93 445 3
Fax number: 0034 93 228 78 99

D.O.R.C. Limited

Country: United Kingdom
Postal address: Millhouse, 32-38 East Street,
Rochford, Essex, SS4 1DB United Kingdom
Telephone number: +44 (0) 800 051 8377

D.O.R.C. GmbH

Country: Austria
Visiting address: Mariahilfer Strasse 123 3.
Floor, 1060 Vienna, Austria
Telephone number: +43 1 599 99 630
Fax number: +43 1 599 99 700

D.O.R.C. Deutschland GmbH

Country: Germany
Visiting address: Monschauer Straße 12, 40549
Düsseldorf, Germany
Telephone number: +49 (0) 211 5229-1580
Fax number: +49 (0) 211 5229-1585

D.O.R.C. Italy S.r.l.

Country: Italy
Visiting address: Via Paracelso 26, 20864
Agrate Brianza MB, Italy (Centro Direzionale
Colleoni, Palazzo Cassiopea 3)
Telephone number: +39 (0) 2 00696401
Fax number: +39 (0) 2 00696400

D.O.R.C. Scandinavia AB

Country: Sweden
Visiting address: Bettorpsgatan 10 SE-703 69
Örebro, Sweden
Telephone number: +46 1912 1514
Fax number: +46 1918 8204

Dutch Ophthalmic USA, Inc. (US / Canada)

Country: United States
Visiting address: Dutch Ophthalmic USA 10
Continental Drive, Bldg 1 Exeter, NH 03833, U.S.A.
Telephone number: +180075 DUTCH or +1603-
7786929
Fax number: +1 603 778 0911

AUTHORIZED D.O.R.C. DEALER

Adresse : Cooperative G 08, L'Appréval
Lot 134, Kouba, Alger.

Tel./Fax : +213 (0)23 60 73 74

Direction Commerciale :

Mob : +213 (0)560 77 29 98

info@hmgm-dz.com

Délégué Médical :

+213 (0)561 67 66 43

+213 (0)561 94 93 79

Google-Maps : 36°43'09.8"N 3°05'17.7"E



www.hmgm-dz.com

Inspired by you created by DORC

www.dorcglobal.com